



## DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU

### ANIOXYDE 1000 LD et BANDELETTES ANIOXYDE 1000 LD

#### DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU DU MATÉRIEL THERMOSENSIBLE ET DU MATÉRIEL D'ENDOSCOPIE

- Durée de conservation avant ouverture: 24 mois
- Formule brevetée
- Désinfectant de haut niveau issu du système PHERA®, actif sur les spores de bactéries
- Production extemporanée d'acide peracétique
- Alternative au glutaraldéhyde
- Sans aldéhyde: pas de fixation de protéine
- Contrôle de l'efficacité du bain avec des bandelettes
- Spectre complet en 5 minutes




# ANIOXYDE 1000 LD

Désinfectant de haut niveau du matériel thermosensible et du matériel d'endoscopie

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur du bain: rose après activation
- Absence de vapeur d'acide acétique: meilleure tolérance par l'utilisateur
- Utilisation simplifiée: activateur intégré au bidon de 5 L
- Efficacité prouvée à 1000 ppm d'acide peracétique pour un spectre complet\*
- Durée d'utilisation du bain de trempage: 14 jours maximum (7 jours pour la France). Vérifier la conformité du bain avec les bandelettes de contrôle
- Large compatibilité vis-à-vis des matériaux, bacs et paillasses
- Peut être utilisé en présence d'un système d'aspiration des vapeurs
- La solution désinfectante contient de 2000 ppm d'acide peracétique (après activation) à 1000 ppm (concentration limite du seuil détectée par bandelette de contrôle)

## MODE D'EMPLOI

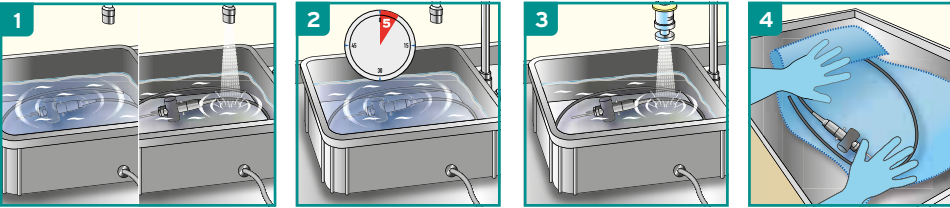

**Etape de pré-désinfection:**  
Nettoyer le dispositif médical avec un produit détergent ou pré-désinfectant. Rincer abondamment. Pour le matériel endoscopique: brosser les canaux.

**Etape de désinfection:**  
Verser la solution activée (voir la procédure d'activation de la solution sur l'étiquette/protocole). Couvrir le bac. Respecter le temps de contact minimum. Pour le matériel endoscopique: faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. Ne pas ajouter d'autre produit dans Anioxyde 1000 LD.

Rincer abondamment avec de l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie : rincer les parties internes et externes du dispositif médical.

Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| ACTIVITÉ / CONDITIONS                                                           | TEMPS DE CONTACT |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bactéricide - Selon EN 13727/EN 14561, conditions de propreté                   | 5 min            |
| Levuricide - Selon EN 13624/EN 14562, conditions de propreté                    | 5 min            |
| Tuberculocide - Selon EN 14348/EN 14563, conditions de propreté                 | 5 min            |
| Fongicide - Selon EN 13624/EN 14562, conditons de propreté                      | 5 min            |
| Mycobactéricide - Selon EN 14348/EN 14563, conditions de propreté               | 5 min            |
| Virucide - Selon EN 14476/EN 17111, conditions de propreté                      | 5 min            |
| Actif sur Adenovirus - Selon EN 14476/EN 17111, conditons de propreté           | 5 min            |
| Actif sur Norovirus - Selon EN 14476/EN 17111, conditons de propreté            | 5 min            |
| Sporicide (B. subtilis / C. difficile) - Selon EN 17126, conditions de propreté | 5 min            |

## INFORMATIONS

| PRODUIT          | CONDITIONNEMENT                                                                                    | REFERENCE |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anioxyde 1000 LD | 4 bidons de 5 L + activateur intégré                                                               | 2824.299  |
| Anioxyde 1000 LD | Boîte de 50 bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans l'ANIOXYDE 1000 LD (1000 ppm) | 100.120   |



## INDICATION

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux: instrumentation médico-chirurgicale, matériel thermosensible et matériel d'endoscopie.

## COMPOSITION

Production extemporanée d'acide peracétique par l'acétylcaprolactam (système PHERA), l'Anioxyde 1000 LD contient 3% de peroxyde d'hydrogène.

## MODE D'EMPLOI

Solution à deux composants pour usage professionnel. Prêt à l'emploi après activation. Avant la première utilisation, attendre au moins 30 minutes (temps nécessaire à l'activation du produit). Nettoyer et rincer soigneusement le dispositif médical avant trempage dans ANIOXYDE 1000 LD (solution activée).

**Pour bidon de 5 L:** Versez la totalité de l'activateur (flacon contenant 38,8 ml) dans le générateur (bidon de 5 L) puis versez la solution produite dans le bain de trempage.

**Pour un flacon de 1 L:** Versez la totalité de l'activateur (flacon contenant 8,3 ml) dans le générateur (bidon de 1 L) puis versez la solution produite dans le bain de trempage.

Vérifier le taux d'acide peracétique avec une bandelette de contrôle ANIOXYDE 1000 LD au début de la séance, à la reprise d'activité et toutes les 4 heures en cas d'activité consécutive. Conservation maximale du bain de trempage: 14 jours (Sauf en France - 7 jours maximum selon la réglementation française)

- Etape de pré-désinfection:** Nettoyer le dispositif médical avec un produit détergent ou pré-désinfectant. Rincer abondamment. Pour le matériel endoscopique: brosser les canaux.
- Etape de désinfection:** Verser la solution activée (voir la procédure d'activation de la solution sur l'étiquette/protocole). Couvrir le bac. Respecter le temps de contact minimum. Pour le matériel endoscopique: faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. Ne pas ajouter d'autre produit dans Anioxyde 1000 LD.
- Rincer abondamment avec de l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie : rincer les parties internes et externes du dispositif médical.
- Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage: entre +5°C et +25°C.

## CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOXYDE 1000 LD est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

## POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

# BANDELETTES ANIOXYDE 1000 LD

## INDICATIONS

50 bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXYDE 1000 LD.

## MODE D'EMPLOI

- Tremper la bandelette pendant une seconde, la sortir en la secouant pour éliminer l'excès de liquide
- Lecture après 10 secondes  
Noir uniforme sur toute la plage réactionnelle : CONFORME  
Coloration non uniforme, présence de points blanc, évanescence rapide de la couleur : NON CONFORME
- Ne jamais interpréter un résultat obtenu plus de 15 secondes après trempage
- Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au mode d'emploi de l'étiquette de l'ANIOXYDE 1000 LD

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Refermer le tube après prélèvement d'une bandelette. Conserver à l'abri de l'humidité. Respecter la date limite d'utilisation reprise sur l'étiquette. Se conserve 90 jours après ouverture. Stocker entre +5°C et +25°C.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éliminer le produit et son récipient en prenant toutes les précautions d'usage. Usage réservé aux professionnels.



## LECTURE APRÈS 10 SECONDES:

**Conforme**  
Noir uniforme sur toute la plage réactionnelle



**Non conforme**  
Coloration non uniforme, présence de points blanc, évanescence rapide de la couleur



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



**LABORATOIRES ANIOS**

1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribué par :

**LABORATOIRES ANIOS**

1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France



[www.anios.com](http://www.anios.com)