



DENTASEPT®

Aspiration AF+

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des circuits d'aspiration en milieu dentaire. Compatible avec les différents systèmes d'aspiration. Ne produit pas de mousse.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Non moussant
- ✓ Triple action - nettoyante, désincrustante et désinfectante
- ✓ Efficacité prouvée sur le biofilm selon ISO/TS 15883 – 5 : 2006
- ✓ Dilution très économique à 2% : 5L de concentré = 250L de solution prête à l'emploi
- ✓ Efficace dès 15 minutes – actif contre tous les virus enveloppés¹
- ✓ Non classé dangereux pour l'environnement après dilution à 2%
- ✓ Dispositif médical de classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée)

¹ L'institut Robert Koch (RKI) recommande l'utilisation de désinfectants avec une activité virucide limitée pour interrompre la chaîne de l'infection. Selon le RKI, une activité virucide limitée (efficace sur les virus enveloppés) correspond à une activité sur Vaccinia virus et BVDV.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 15 minutes
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 15 minutes
Tuberculocide : EN 14348, EN 14563 – 60 minutes
Actif selon EN 14476 sur Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus – 5 minutes.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, association d'agents tensioactifs, agent séquestrant, colorant et excipients.

CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES

Flacon doseur d'1 litre
Bidon de 5 litres avec pompe doseuse
Dentasept® ASP System (424050).



(424050)



ASPIRATION

DENTASEPT® Aspiration AF+

PROTOCOLE D'UTILISATION

Nettoyage et désinfection des circuits d'aspiration en milieu dentaire. Compatible avec les différents systèmes d'aspiration. Ne produit pas de mousse.


AVANT UTILISATION

Porter des gants appropriés.

COMMENT L'UTILISER

A la fin de la journée, préparer 2 litres de solution diluée à l'aide du Dentasept® ASP System.

- 1 Diluer à 2% (40ml pour 2 litres d'eau).
Flacon 1 litre : Remplir le doseur jusqu'à l'indicateur 20ml, puis répéter l'opération.
Bidon 5 litres : 2 pressions de pompe.
- 2 Secouer délicatement le Dentasept® ASP System pour mélanger la solution.
- 3 Dévisser partiellement le bouchon noir pour permettre à l'air d'être aspiré dans le Dentasept® ASP System. Fixer les tuyaux du système d'aspiration et aspirer la solution diluée.
- 4 Laisser la solution agir pendant un minimum de 15 minutes. Il est possible de laisser la solution agir pendant la nuit.
- 5 Remplir le Dentasept® ASP System avec 1 litre d'eau propre minimum et l'aspirer dans le système d'aspiration.

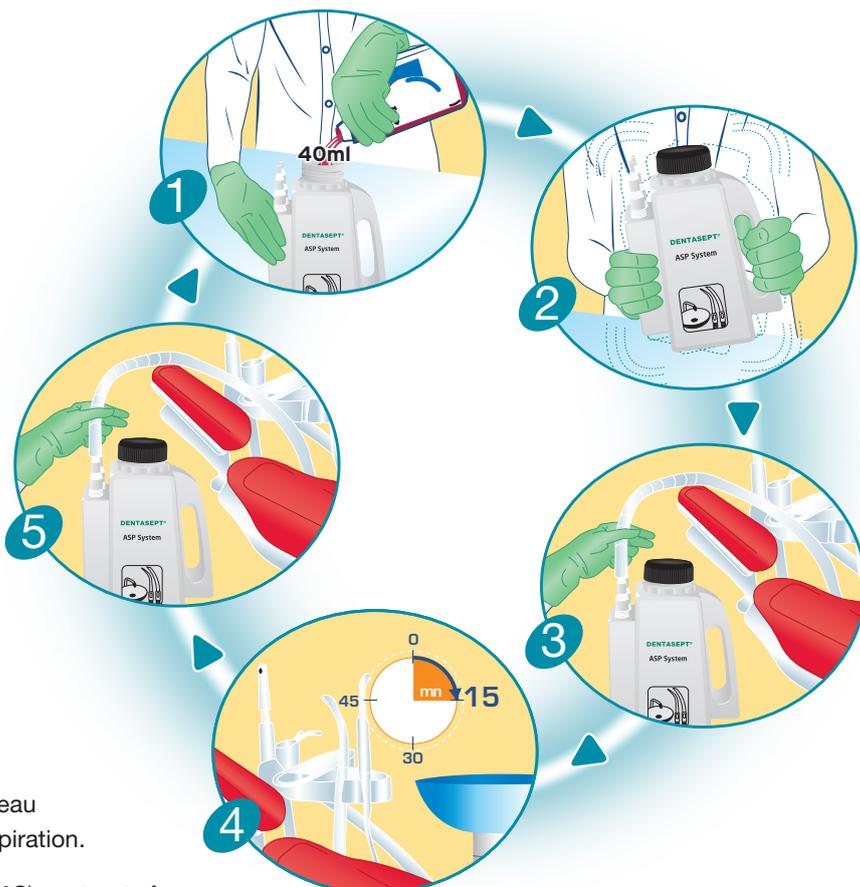

Toute exposition prolongée à température élevée (>35°C) peut entraîner une modification de la couleur sans altération des performances antimicrobiennes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux : respecter les précautions d'emploi (établies conformément à la réglementation européenne en matière de classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit. Usage professionnel uniquement. Dispositif médical de classe IIa (conformément à la directive 93/42/CEE modifiée, relative aux dispositifs médicaux). Conserver entre +5 et +35°C.