

Manuel d'assemblage et d'utilisation

Fauteuil releveur électrique

Kozy Serenity

Référence : HEX9016TER (Terracota) / HEX9016BEI (Beige)

Spécifications techniques :

- Alimentation électrique : 110V-240V.
- Charge maximum : 220 lbs / 110 kg.

Environnement :

Intérieur uniquement (pièces sèches).

AVERTISSEMENT :


Ne pas dépasser le poids maximum spécifié.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

Veuillez lire attentivement et intégralement ce manuel avant la première utilisation.

Note relative aux illustrations :

Les schémas et visuels présentés dans ce manuel sont fournis à titre indicatif pour illustrer le fonctionnement général. La forme ou les finitions de votre modèle peuvent légèrement varier, mais les étapes d'assemblage et de fonctionnement restent strictement identiques ou sensiblement les mêmes.

Liste des pièces

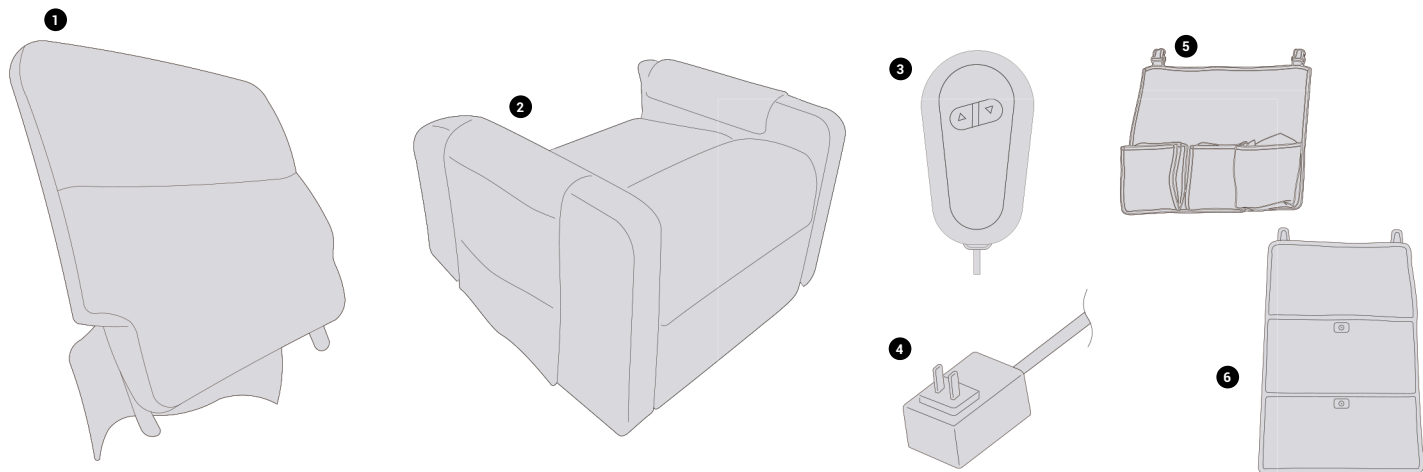


1. Dossier principal
2. Base assise (avec mécanisme motorisé intégré)
3. Télécommande
4. Bloc d'alimentation électrique / Transformateur secteur

5. [FACULTATIF] Poche(s) de rangement latérale(s) amovible(s)
6. [FACULTATIF] Câble d'alimentation pour fonction Chauffage / Massage


Guide d'assemblage pas-à-pas

Assemblage : 2 personnes recommandées.

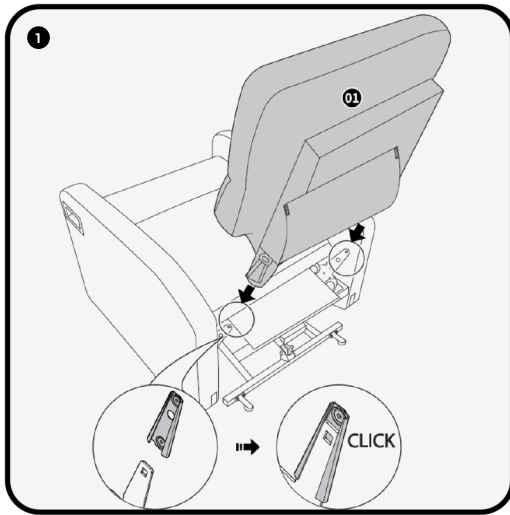

Etape 1 : Installation du dossier

- Placez la base du fauteuil [2] sur un sol plat et dégagé.
- Positionnez le dossier [1] au-dessus de la base.
- Alignez les glissières métalliques situées de chaque côté du dossier avec les tiges de fixation de la base.
- Poussez fermement le dossier vers le bas jusqu'à entendre un « Clic » de verrouillage de chaque côté.

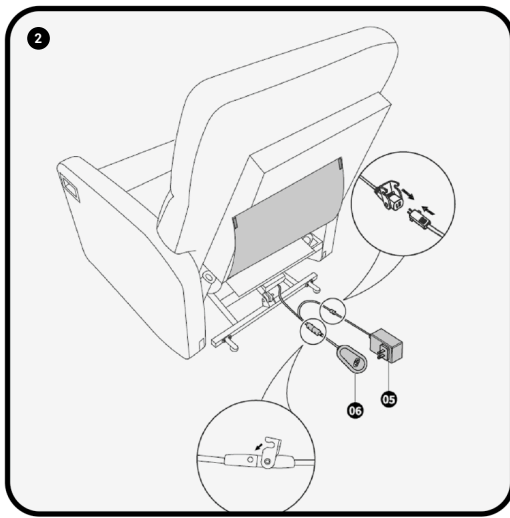


Etape 2 : Raccordements électriques

- Vérifiez que la télécommande filaire [03] est bien connectée au câble du moteur situé sous la base.
- Raccordez le bloc d'alimentation [04] au câble du moteur principal, puis vissez la bague de sécurité si votre modèle en est équipé.
- [FACULTATIF] Connectez les câbles secondaires pour les fonctions de massage/chauffage en respectant les détrompeurs détrompés.

Etape 3 : Fixation des rabat textile et des rangements

- Ajustez le tissu au niveau de la jonction assise/dossier en alignant les bandes auto-agrippantes.
- Rabattez la toile située à l'arrière du dossier vers le bas du fauteuil, puis fixez-la solidement à l'aide des bandes auto-agrippantes (Velcro).
- [FACULTATIF] Attachez les pochettes de rangement latérales ([5] et [6]) sur les côtés du fauteuil à l'aide des sangle.

Guide d'utilisation de la télécommande

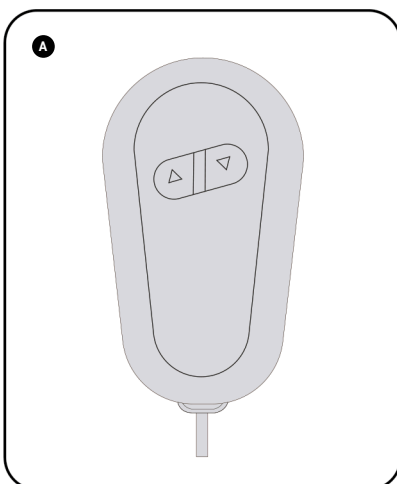

Option A : Modèle monomoteur

- **Bouton MONTER / RELEVER (▲) :**
Maintenez appuyé pour incliner progressivement le fauteuil vers l'avant et vous accompagner vers la position debout.
- **Bouton DESCENDRE / INCLINER (▼) :**
Maintenez appuyé pour faire revenir le fauteuil en position assise, puis déployer le repose-pieds et incliner le dossier.

Option B : Modèle Bimoteur

- **Boutons DOSSIER :** Permettent d'incliner ou de redresser le dossier indépendamment.
- **Boutons REPOSE-PIEDS / RELEVEUR :**
Permettent d'actionner le repose-pieds ou de faire basculer le fauteuil en position releveur.

Option C : Modèle massage et chauffage

- Utilisez les boutons dédiés sur la télécommande pour activer les zones de massage désirées ou la fonction chauffante dorsale.

Positionnement et configuration du fauteuil

Pour garantir un fonctionnement en toute sécurité :

- **Dégagement arrière et avant** : Veillez à laisser un espace suffisant entre le mur (ou tout meuble) et le dossier du fauteuil afin de permettre l'inclinaison complète sans choc.
- **Gestion des câbles** : Placez le câble d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. S'assurer que le câble ne passe pas sous la structure métallique du fauteuil.
- **Stabilité** : Réglez les patins d'ajustement sous la base pour que le fauteuil soit parfaitement stable et de niveau sur le sol.

S'asseoir et se lever en toute sécurité

Veillez à bien repositionner et lisser le siège ainsi que les coussins pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme, éviter tout blocage et vous garantir une assise parfaitement stable.



Posture correcte

Personne assise bien au centre.



Posture correcte

Personne s'appuyant sur les deux accoudoirs lors de la levée



Posture incorrecte

Personne assise de travers ou sur un accoudoir.

Consignes de posture :

- **Pour s'asseoir** : Relevez le fauteuil à une hauteur confortable avec la télécommande. Adossez-vous au centre de l'assise, posez les deux mains sur les accoudoirs, puis laissez-vous descendre doucement en actionnant le bouton de descente.
- **Pour se lever** : Assurez-vous que le repose-pieds est complètement replié. Actionnez la fonction «MONTER», maintenez une posture centrée, puis appuyez-vous sur les accoudoirs une fois le fauteuil à hauteur d'appui.
- **Consigne d'interdiction** : Ne sautez jamais et ne vous laissez pas tomber brutalement dans le fauteuil. Ne vous asseyez jamais sur le repose-pieds lorsqu'il est déplié.

Zones de danger et risque de pincement

- **Enfants et animaux domestiques** : Gardez toujours les enfants et les animaux éloignés du fauteuil lorsqu'il est en mouvement ou déployé. Vérifiez systématiquement sous le fauteuil avant de le redescendre.
- **Espace sous le fauteuil** : Ne glissez jamais vos mains, vos pieds ou des objets dans le mécanisme métallique sous l'assise.
- **Position de repos** : Lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil, ramenez-le toujours en position assise standard fermée.

Entretien et nettoyage

Sécurité :

Débranchez toujours le fauteuil de la prise secteur avant toute opération de nettoyage.
Attendez le séchage complet avant de le rebrancher.

- **En cas de tache :** Épongez immédiatement le liquide renversé à l'aide d'un chiffon. Nettoyez délicatement avec un chiffon légèrement humidifié d'eau tiède et de savon doux. Ne frottez pas vigoureusement.
- **À NE PAS UTILISER :** N'utilisez jamais d'alcool, de solvants, de produits abrasifs, d'ammoniaque ou de cires pour meubles sur le revêtement.

Guide de dépannage général

Problème constaté	Cause probable	Solution recommandée
Le fauteuil ne bouge pas du tout.	Le fauteuil n'est pas alimenté en électricité ou les câbles sont débranchés.	1. Vérifiez que la prise murale fonctionne. 2. Vérifiez le branchement du transformateur et de la télécommande.
Le moteur s'arrête en cours d'utilisation.	Sécurité thermique activée suite à un usage continu prolongé.	Laissez refroidir le moteur pendant 10 à 15 minutes sans y toucher. La sécurité se réinitialisera automatiquement.
Le moteur vibre ou émet un léger bourdonnement.	Fonctionnement normal du moteur électrique.	Aucun traitement requis. Si un frottement métallique strident apparaît, contactez le SAV.
Le moteur ne s'arrête plus.	Le fauteuil n'est pas alimenté en électricité ou les câbles sont débranchés.	Coupez immédiatement l'alimentation au secteur et contactez le service client.
Odeur de brûlé ou dégagement de fumée.	Défaillance électrique grave ou surchauffe interne.	DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT le fauteuil de la prise secteur et contactez votre service après-vente.

Contactez-nous

Pour toute question ou problème lié à la qualité de nos produits, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : contact@union-healthcare.com.

