


Protection de barrières de lit EVOLUTION pour barrières métalliques

Référence Unitaire	Référence Par paire	L1	H1	E1	L2	E2	Poids
07/2440U	07/2440P	140 cm	30 cm	3 cm	45 cm	15 cm	0,6 kg
07/2490U	07/2490P	190 cm	30 cm	3 cm	60 cm	15 cm	1 kg

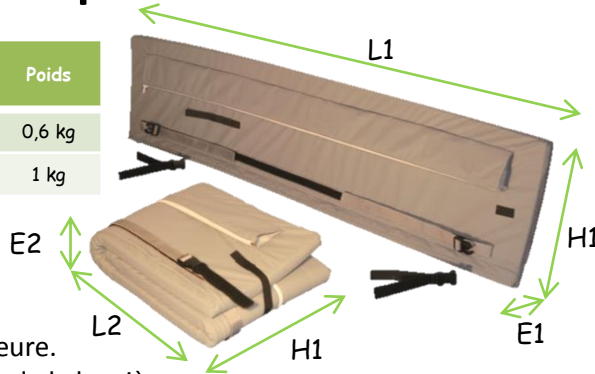

Mise en place:

1. Positionner la protection de barrière coté patient.
2. Zipper le fourreau sur la tubulure métallique supérieure.
3. Monter les clips femelles sur les tubulures verticales de la barrière
4. Clipper et ajuster les sangles



Escamotage de la barrière:

1. Déclipper les boucles latérales
2. Retourner la protection en la faisant pivoter autour de la barre
3. Escamoter la barrière



Attention : Ne tentez pas d'abaisser la barrière sans avoir retourné la protection. Ceci forcera sur le fourreau et l'endommagera.

Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 32kg/m³ – Classement au feu M4
- Housse : Pharmatex 60% Polyuréthane, 40% Polyester – Classement au feu CRIB 5
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Boucles : 100% Acétal

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol

La housse ne doit être replacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse : *    

* Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.