



MOEM est une chaise de douche et de toilette destinée à faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite. Il est destiné à être utilisé dans la douche, le lavabo et les toilettes, ainsi qu'au transport de patients sur de courts trajets et dans des espaces intérieurs, aussi bien dans les environnements domestiques que dans les centres de santé.

Il peut être utilisé dans les zones sanitaires mais pas dans des environnements corrosifs tels que les piscines ou similaires.

Il ne peut pas être utilisé comme méthode de fixation à l'intérieur des véhicules ou autres moyens de transport.

Il est destiné aux adultes (généralement d'une taille minimale de 146 cm et d'un poids minimum de 40 kg) et à peau intacte. Le **poids maximum de l'utilisateur est de 150 kg**.

La chaise de bain MOEM est considérée comme un dispositif médical de classe 1 selon le Règlement Européen 2017/745 sur les Dispositifs Médicaux (MDR).


Il est donc destiné à être utilisé chez l'être humain à des fins de traitement ou de soulagement d'une maladie, ainsi que pour le traitement, le soulagement ou la compensation d'une blessure ou d'une déficience.

Conforme à la norme : * ISO 17966 « Aides à l'hygiène personnelle au service des utilisateurs : exigences et méthodes d'essai. »

TECNIMOEM CARE, SL défend une politique permanente d'amélioration de ses produits. Pour cette raison, les caractéristiques des appareils peuvent être modifiées sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
CHARGE MAXIMALE	150KG
POIDS de la chaise	15KG
ROUES	Ø125 mm avec frein indépendant
CADRE EXTÉRIEUR, revêtement époxy-polyester (Selon la norme UNE 10305-5)	Tube acier Ø25x1,5mm Plaque d'acier 30x5mm
Hauteur du siège au sol	515mm
Espace libre sous les toilettes	470mm
Espace libre entre les accoudoirs	425mm
Mesures extérieures :	
repose-pieds déployé – chaise en mouvement	longueur 905, largeur 530, hauteur 1085 mm
repose-pieds collecté – chaise en mouvement	longueur 649, largeur 530, hauteur 1085 mm
repose-pieds collecté – chaise de repos/rangement	longueur 615, largeur 530, hauteur 1085 mm
diamètre de tournage	1000mm
Largeur du pivot	1000mm
ACCOUDOIR	amovible
REPOSE-PIEDS	Amovible et réglable sur 5 positions
HOUSSE DE SIÈGE	Amovible et pliable
Vis en acier inoxydable	
Dossier, accoudoirs, siège, repose-pieds, housse de siège, urinoir, en polypropylène	
Poignées et supports de roues en polypropylène et fibre de verre	
La chaise n'est pas pliable. Aucune pièce amovible ne pèse plus de 10 kg.	
Le fauteuil ne perturbe pas le fonctionnement des autres appareils à proximité émettant des champs électromagnétiques	

MEDIDAS EN MM

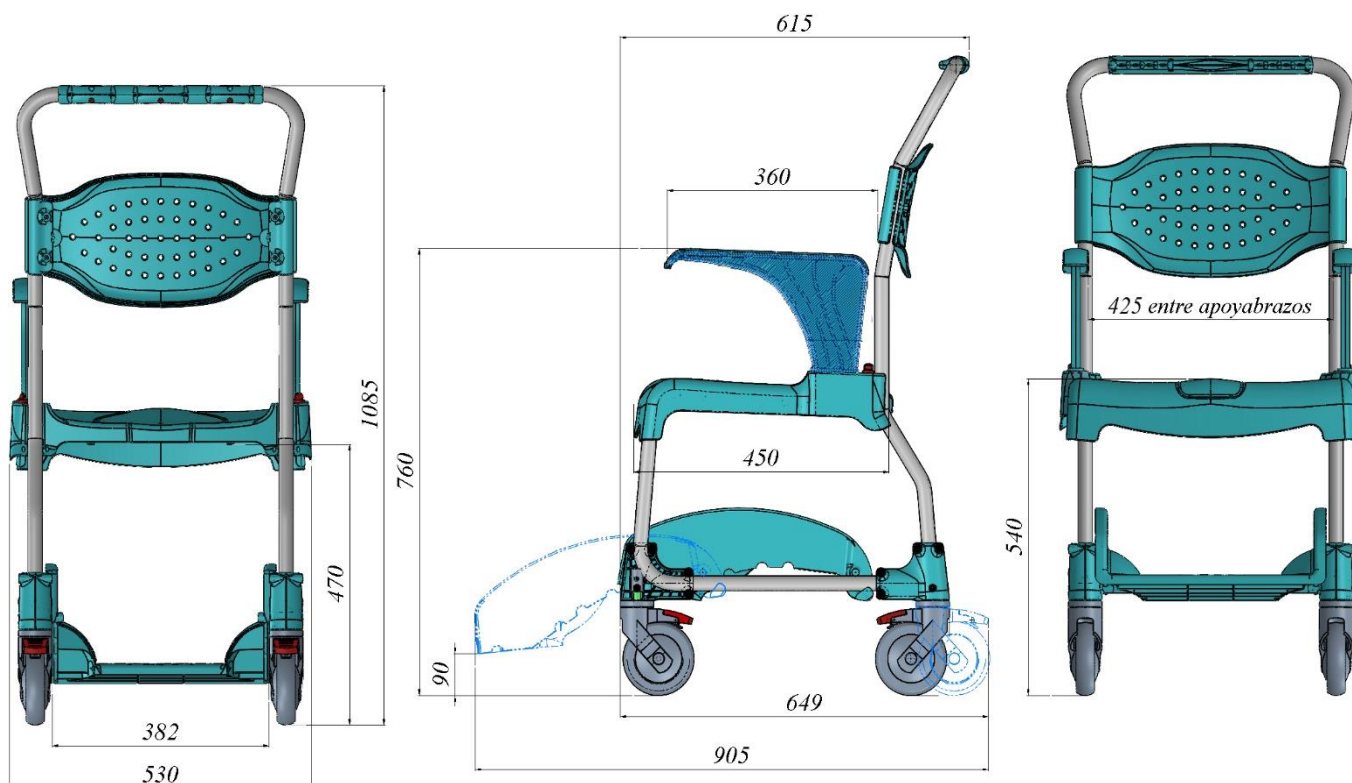

GARANTIE ET DURÉE DE VIE UTILE

Nos produits sont **garantis pour une durée de 3 ans** contre tout défaut de fabrication. Si l'utilisateur/soignant/acheteur permet que des interventions ou des personnalisations soient effectuées par du personnel non autorisé ou ne respecte pas les recommandations de nettoyage et d'entretien, tous les droits de garantie et de responsabilité expireront.

La chaise est réutilisable. Il n'a pas de **durée d'utilité spécifique** puisque des variables telles qu'une utilisation plus ou moins grande ou le mode d'utilisation approprié/inapproprié l'influencent. Cependant, la durée de vie utile de la chaise est estimée à **5 ans**, à condition qu'elle soit utilisée quotidiennement et conformément aux instructions de sécurité, de nettoyage, de stockage et d'entretien établies dans le manuel d'utilisation.

Tecni moem dispose d'un réseau de distributeurs pour la commercialisation de tous ses produits. Si vous avez un problème ou une question **de service technique**, l'utilisateur final doit contacter le DISTRIBUTEUR auprès duquel le produit a été acheté. Le distributeur disposera d'une formation suffisante et de pièces de rechange fournies par Tecni moem pour entretenir **les produits**.

ACCESSOIRES**SIÈGE DE CHAISE MOEM**

Assise en polyuréthane bi-composant (polyol et isocyanate), sans CFC ni HCFC .
Enduit de bleu. Il s'adapte au siège fixe de la chaise. Disponible en deux modèles.

**SIÈGE OUVERT**

Poids 900 gr.

Mesures env. 50x52x12cm.

**SIÈGE FERMÉ**

Poids 940 gr.

Mesures env. 50x52x12cm.

CEINTURE DE CHAISE MOEM

Ceinture abdominale pour fixer l'utilisateur au fauteuil



Tissu en maille 100 % polyester. Garniture acrylique de 3 cm (bleu). Bandes de fixation en polyester. Il s'adapte au dossier de la chaise.

Bande de 45 x 11,5cm environ.

Contour du ruban 110cm environ.

Poids 100 gr.

**NETTOYAGE, ENTRETIEN , TRANSPORT ET STOCKAGE****Nettoyage**

La chaise a été conçue pour un nettoyage facile et une désinfection optimale.

- Gardez les roues et les freins exempts de saleté ou de résidus de savon.
- Nettoyer périodiquement avec des produits non abrasifs (ph entre 5 et 9).
- Ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à 85°C.
- Utiliser une solution désinfectante à base d'alcool diluée à 70 %.
- Rincer et sécher après chaque utilisation.

Entretien

AVANT TOUTE UTILISATION DE LA CHAISE , en plus des mesures de nettoyage décrites ci-dessus, les parties de la chaise dans lesquelles des défauts sont constatés doivent être remplacées. Pour cela, contactez le distributeur du fauteuil afin de lui fournir les pièces de rechange nécessaires.

Les opérations de maintenance ne peuvent être effectuées que par du personnel technique qualifié et autorisé. Avant d'effectuer toute intervention de réparation, d'entretien, de nettoyage ou de désinfection, consulter le fabricant ou www.tecnimoem.com pour les instructions de changement des composants.

TECNIMOEM recommande de procéder à une **inspection périodique** du fauteuil et de ses accessoires afin de les maintenir en bon état de fonctionnement. Les points suivants méritent une attention particulière :

- Supports de roue en plastique
- Les roues et leurs freins
- Le cadre en métal (pas de rouille)
- Autres pièces en plastique
- Les vis (correctement serrées).

La fréquence des contrôles techniques doit être adaptée à l'état du fauteuil et aux conditions particulières d'utilisation, car certains composants peuvent devoir être changés périodiquement.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	Fréquence
SUPPORTS DE ROUES	Tous les 3 ans
ACCOUDOIR DE CHAISE DE SALLE DE BAINS	Tous les 3 ans
CHAISE MOEM ASSEMBLAGE ROUE+AXE EN ACIER INOXYDABLE	Tous les 3 ans
CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR CHAISE MOEM	Tous les 3 ans
CONJ. DOSSIER DE CHAISE MOEM + BRIDE + QUINCAILLERIE	Tous les 5 ans
CONJ. SIÈGE+BRIDE DE CHAISE MOEM+MATÉRIEL	Tous les 5 ans
CONJ. FERMETURE + PLAQUE DE BRAS DE CHAISE MOEM + QUINCAILLERIE	Tous les 5 ans
CONJ. GUIDES DE CHAISE POT + MOEM + QUINCAILLERIE	Tous les 5 ans
POIGNÉE DE CHAISE DE SALLE DE BAINS + QUINCAILLERIE	Tous les 5 ans
HOUSSE DE SIÈGE DE CHAISE DE SALLE DE BAINS	Tous les 5 ans
CHAISE DE SALLE DE BAINS REPOSE-PIEDS	Tous les 5 ans
CHAISE MOEM À SIÈGE OUVERT	Tous les 5 ans
CHAISE MOEM SIÈGE FERMÉ	Tous les 5 ans

Transport et stockage

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer un transport sûr du fauteuil et de ses accessoires, en évitant les chocs et la saleté.

Lors du transport et/ou du stockage prolongé du fauteuil, celui-ci doit être avec le repose-pieds escamoté, les roues freinées, fixé avec des sangles, protégé contre la pénétration d'eau ou d'humidité (< 75%) et à une température comprise entre -20°C et + 50°C.

Si le fauteuil est stocké pendant une longue période (plus de 4 mois), son fonctionnement doit être vérifié par une personne qualifiée avant utilisation.

Tecnimoem Care développe, fabrique et distribue des lits, sommiers, ascenseurs, chaises et accessoires à usage gériatrique et domestique.

Dans un monde où la qualité de vie à l'âge adulte est l'atout le plus précieux, **Tecnimoem Care** met tous ses efforts dans la recherche continue et le développement d'éléments pour le repos nécessaires aux personnes qui, en raison de problèmes physiques, de l'âge ou simplement parce qu'elles apprécient l'ergonomie et adaptabilité, ils choisissent nos produits.

Tecnimoem Care, dans son effort d'innovation, intègre les meilleurs matériaux du marché avec des finitions parfaites qui dépassent toutes les normes de qualité et sont ce qui nous différencie et nous fait choisir

SNR : ES-MF-000019199
Selon (UE) 2017/745 MDR



TECNIMOEM CARE SL

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarre) – ESPAGNE
tecnimoem@tecnimoem.com

Tél. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
www.tecnimoem.com