

FICHE TECHNIQUE

DT0023/ver02/210218

Description	AIDES AUX TRANSFERT HANDICARE - SystemRoMedic
Références	Draps de glisse READYSLIDE 11210 (195x70) - 11230 (110x70) - 11250 (70x70) - 11235 (90x110) - 11241 (90x130) Planches ROLLERSLIDE 91450 (Std 175x50) - 91440 (légère) - 91480 (flexible) - 91700 (300 kg) - 91550 (85x50) Matelas EASYSLIDE 10300 (190x60) - 22015 (25x60) - 22010 (50x60 nylon) - 22030 (50x60 microfibres) Planches EASYGLIDE 50200 (60x33) - 50500 (75x33) - 50600 (60x25) - 50400 (85x39 ovale) - 50000 (120x59) Coussins ONEWAYSIDE 20700/20760 (maxi) - Système AUTOSLIDE - TURNSHEET Disques TURNTABLE 50850 et TURNISOFT 50860 Ceintures EASYBELT (60120 à 60150) , FLEXIBELT (60230 à 60260), READYBELT (16023 à 16025) Sangles/Brancard FLEXIMOVE 30120 (60x20 enduit) - 30300 (60x20 velours) - 44012 (110x53) - 44016 (150x43) Draps et Alèses WENDYLETT & EasyRoll <i>voir le catalogue pour toutes les références et tailles</i>
Utilisation	Gamme complète pour tous types de transferts et repositionnements
Certification	label CE, Classe 1

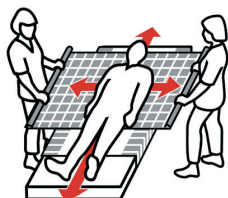


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matelassage	coton, polyester, nylon, microfibres, retardant de flammes
Planches rigides	contreplaqué ou plastique (RollerSlide) - polyéthylène (EasyGlide)
Housses et parties glissantes	polyester et fibres de carbone ULF (Ultra Low Friction)
Draps de glisse	polyamide ULF (Ultra Low Friction)

HYGIENE ET DESINFECTION

Lavage	tous les accessoires lavables le sont à 70°C, WendyLett et WendyLean à 90°C ; nettoyer les autres par essuyage humide
Désinfection	tous les matériels peuvent être désinfectés par utilisation d'un spray alcoolique ou d'un détergent-désinfectant ; rincer et laisser sécher avant réutilisation
Stérilisation	seules sont stérilisables (20 min à 134°C) les parties intérieures (matelassage) des matelas EasySlide
Note :	<i>Des housses à usage unique peuvent être utilisées avec le RollerSlide et l'EasySlide.</i>



GARANTIE







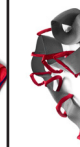


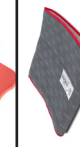






24 mois

CERTIFICATION

A.B.C.	ISO 13 485 (2016)
HANDICARE	ISO 13 485 (2016)
	ISO 14001 (2015)

REALISATION

<i>Fabrication</i>	HANDICARE - Suède
<i>Commercialisation</i>	A.B.C. - France

	Composants	ULF® polyamide	Polyester	Nylon	Polyéthylène	Plastique cellulaire	Micro-fibres	Autres	Lavage 70°C	Lavage 90°C	Séchage 45°C	Séchage Chaud	Spray	Poids Max
	AntiSlip					X							X	-
	AutoSlide	X	X						X		X		X	150 kg
	ReadySlide	X							X				X	150 kg
	EasyBelt/FlexiBelt		X	X					X		X		X	150 kg
	EasyGlide				X								X	135 kg
	EasySlide	X					X		X		X		X	180 kg
	FlexiGrip		X	X					X		X		X	150 kg
	FlexiMove		X	X				Fibres C	X		X		X	150 kg
	FootStool							Trocellen® incompressible					X	-
	OneWaySlide	X	X		X				X		X		X	150 kg
	RollerSlide	X		X				composite	housse		housse		X	150 kg
	RollerSlide Légère	X		X				nid d'abeille	housse		housse		X	135 kg
	RollerSlide Flexible	X		X				mousse	housse		housse		X	150 kg
	SitWalk		X	X					X		X		X	150 kg
	TurnTable				X								X	135 kg
	WendyLett		X							X		X		300 kg