Fiche technique
mylife Aveo™ Autopiqueur



mylife Aveo™ Autopiqueur	
Références des articles et description	70018699 / 7613117029456 Autopiqueur à usage multiple pour autocontrôle de sang capillaire
Code LPP individuel	6134629
Code LPP générique	1117454
Fabricant légal	SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
Mandataire Européen	Emergo Europe
Utilisation prévue	Le dispositif médical mylife Aveo™ Autopiqueur est destiné au prélèvement de sang sur le doigt.
Information sur les dispositifs	Utiliser avec des lancettes à usage unique.
Liste des composants / Matériels	● Composants: Capuchon ● Matériel: Polycarbonate (PC) ● Spécificité, échelon: NA
Sterilisation	NA
Prèsentation du produit	
Conditionnement	1 pièce par boîte

Liberté. Confiance. Avec mylife™.


YPSOMED SELFCARE SOLUTIONS

AV_FAS_FicheTechnique_LancingDevice_MSTR.indd 1 31.05.21 09:19


mylife Aveo™

mylife Aveo™ Autopiqueur


Mode d'emploi

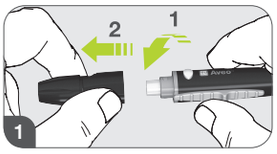


Retirer le capuchon d'extrémité en pivotant délicatement les deux parties dans des sens opposés.

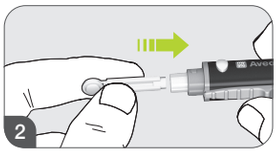

Insérer fermement une nouvelle lancette jetable dans le porte-lancette.

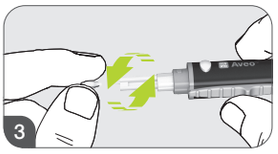

Dévisser et retirer le capuchon protecteur de la lancette jetable.

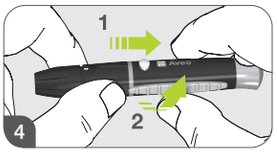

Remettre le capuchon d'extrémité en pivotant délicatement les deux parties jusque dans la position de blocage.

Elimination	L'utilisateur doit éliminer le dispositif médical selon la réglementation en vigueur.
Stockage et transport	NA
Système qualité et certification du produit	Conforme à la norme ISO 15197:2013
Classification CLADIMED	K53AB01
Classification en Europe	Dispositif médical de classe I, MDR
Code UMDNS	10440

700020000/10246005-MSTR-FR-fr/V01

Ypsomed S.A.S // 44 rue Lafayette // 75009 Paris //
info@ypsomed.fr // http://gamme.mylife-diabetescare.fr // Service clientèle: 0800 883056

YPSOMED SELFCARE SOLUTIONS