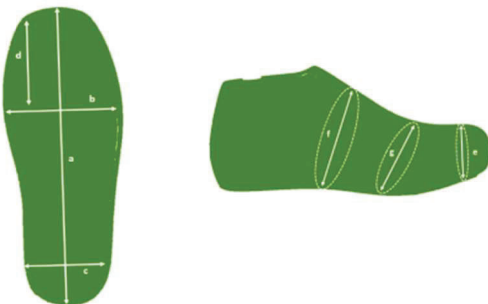


Nom de fabrication :	Patricia®	Referencia:	SACHA
Fabricant:	Celia Ruiz Calzados, SL C/Ciudadela, 18. Pol. Industrial Carrús. 03206 Elx-Elche (Spain) Telf. 965 448 245 Fax: 966 660 098. información@celiaruizcalzados.com		
Désignation commerciale :	Patricia		
Couleurs disponibles :	● Noir		

Dimensions et tailles : Mesures des pieds


Taille	35	36	37	38	39	40	41	42
(a) cm	21,6	22,2	22,8	23,5	24,1	24,8	25,4	26,1
(b) cm	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1
(c) cm	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7
(d) cm	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,7	7,0
(e) cm	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
(f) cm	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
(g) cm	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5

Dimensions et tailles : Mesures pour modèle unisexe


Taille	35	36	37	38	39	40	41	42
(a) cm	22,2	22,8	23,5	24,1	24,8	25,4	26,1	26,7
(b) cm	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3
(c) cm	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7	6,9
(d) cm	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,7	7,0	7,4
(e) cm	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
(f) cm	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0
(g) cm	24,0	24,5	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT SACHA

R-PG-0701


Ed. 1

FR

27/06/2023

Description du produit :	Photographie :
<ul style="list-style-type: none"> - Conçue avec une forme féminine, qui présente divers problèmes de fonctionnalité au niveau des orteils. Chaussures fermées, à coutures plates, à coup-de-pied large et à fermeture velcro à l'avant et avec une fermeture velcro à l'avant. - La semelle cunéiforme offre un plus grand confort et une meilleure stabilité lors de la marche. - Semelle intérieure amovible, permet l'utilisation d'une semelle orthopédique, de silicones numériques ou d'une prothèse dans le pied. - Le tissu supérieur est en polyester, ce qui le rend plus respirant et hydrofuge. <p>Il est donc plus respirant et déperlant.</p>	

Utilisation : <i>Application thérapeutique</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Déformations légères de l'avant-pied et des orteils : <ul style="list-style-type: none"> o Orteils en griffe, orteils en marteau. o Hallux abductus valgus. o Quintus varus (déviation de l'apophyse du cinquième métatarsien). o Luxations ou pré-dislocations métatarso-phalangiennes. o Affections osseuses du cou-de-pied telles que les coalitions dorsales. o Métatarsalgie. - Affections dermatologiques telles que les hémomes, l'IPK, les infections bactériennes, virales et fongiques. - Bandages sur les orteils.

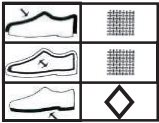Composition du produit:	
Tissu extérieur :	100% polyester
Tissu intérieur :	100% fibres de polyester
Talon intérieur :	100% fibres polyester
Mousse de rembourrage :	Polyester, polyester et mousse de polyuréthane.
Bordures :	100% polyester
Système de fermeture :	100% polyamide
Semelle intérieure :	100% fibres de polyester.
Semelle extérieure :	Eponge polyester.
Semelle :	Mélange de copolymère de caoutchouc styrène-butadiène et de caoutchouc naturel (latex)
Rembourrage de la semelle :	Granulés de liège naturel (98%), avec liant PU (2%)
Pictogrammes:	

Législation :

Tous les tissus qui composent les chaussures Celia Ruiz sont certifiés OEKO-Tex Standard 100, conformément au règlement REACH.

Ces chaussures ont été évaluées sur la base de tests chimiques et mécaniques dans des laboratoires accrédités afin de garantir le respect des normes de qualité.

Précautions:


Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Vérifiez au préalable que l'emballage contient un produit identique à l'image figurant sur l'étiquette de l'emballage et qu'il n'a pas été endommagé. Toute altération des propriétés du produit ou de ses performances doit faire renoncer à son utilisation et l'anomalie doit être immédiatement signalée au fabricant.

Vérifier périodiquement la capacité fonctionnelle des chaussures, l'usure, les dommages ou toute autre détérioration connexe. Si tel est le cas

cessez d'utiliser la chaussure et contactez votre professionnel de la santé.

En raison des propriétés de fabrication de la semelle intérieure amovible, un produit savonneux peut être visible lors des premiers lavages.

Ce savon n'altère pas les caractéristiques de la chaussure, mais il ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses ou les plaies ouvertes.

En cas de doute, veuillez consulter un professionnel de la santé.

Advertencias:


Les chaussures Adonis ne doivent pas être utilisées par des personnes hypersensibles à l'un des composants du produit. Contre-indiquées pour les personnes allergiques au latex, car la semelle contient du caoutchouc naturel ou peut contenir des traces de latex.



Veuillez noter qu'il y a un risque de glissade sur les surfaces mouillées ou glissantes, ainsi que sur la neige ou la glace. Dans de tels cas, il convient de procéder avec la plus grande prudence.

En cas d'incident grave (décès ou détérioration grave de la santé), le fabricant et/ou l'autorité compétente de l'État membre où le patient est établi doivent être informés.

Conservation et entretien :

Toujours conserver dans un endroit frais et sec. Stocker le produit en toute sécurité et dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière intense.


Pour nettoyer les tissus des chaussures, utilisez un savon neutre pour vêtements délicats. Laver à la main à l'eau tiède et bien rincer abondamment. Sécher à l'écart d'une source de chaleur (jamais de sèche-linge ou de radiateur).









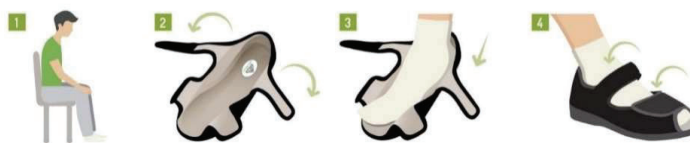

À la fin de la vie utile du produit, éliminez le produit et son emballage conformément aux réglementations applicables en matière de gestion des déchets.



Instructions d'utilisation :

- 1) Asseyez-vous sur un support stable.
- 2) Ouvrez les fermetures réglables des chaussures.
- 3) Placez le pied sur la chaussure.
- 4) Fermer la chaussure autour du pied, sans trop serrer et sans jeu.


Identification des symboles :

	Lot <i>Indique le code de lot du fabricant afin qu'il puisse être identifié, reflétant également la date de fabrication.</i>
	Identification unique du produit <i>Codé et structuré selon le système GS1-128. Ce code est référencé comme identifiant unique du dispositif, divisé en codes-barres structurés et référencés. Il permet d'identifier sans ambiguïté le produit spécifique sur le marché, en affichant ses caractéristiques ainsi que ses variantes (lot, numéro de série, date de fabrication, etc.).</i>
	Numéro de catalogue <i>Indique le numéro de catalogue du fabricant permettant d'identifier le dispositif médical.</i>
	Fabricant <i>Indique qui est le fabricant et qui est directement responsable du dispositif médical.</i>
	Date de fabrication <i>Indique l'année et le mois de fabrication de la chaussure.</i>
	Distributeur <i>Indique l'entité qui distribue localement ce dispositif médical.</i>
	Se référer au mode d'emploi <i>Indique la nécessité pour l'utilisateur ou le professionnel de consulter les instructions respectives avant l'utilisation.</i>
	Allergène - Contient du latex <i>Signale une possible réaction allergique, indiquant la présence de caoutchouc ou de latex naturel séché comme matériau de construction dans le dispositif médical voire dans l'emballage lui-même, peut entraîner une réaction allergique.</i>
	Utilisation multiple chez un même patient <i>Indique que ce dispositif médical peut être utilisé à plusieurs reprises par un même patient.</i>
	Emballage endommagé <i>N'utilisez pas ce produit si l'emballage est endommagé ou détérioré et suivez les instructions d'utilisation.</i>
	Attention <i>Faites preuve de la prudence nécessaire aux endroits indiqués par ce symbole afin de garantir une utilisation sûre et correcte de ce dispositif médical.</i>