



[Fiche technique]

Coussin hémostatique Coupe Hém + 10 cm

Réf. 304099

COMPRESSIONUU

Kit hémostatique non stérile 1 partie.

Pansement absorbant cousu avec le coussin sur la bande élastique.

Prêt à l'emploi.

Equipé d'une partie non élastique placée entre les 2 parties élastiques afin d'éviter un serrement trop important (effet garrot).

Doté d'un emballage scellé et solide.

Livré avec une paire de gants afin d'éviter tout risque de contamination.

Etiquette prévue pour indiquer l'heure de pose.

Coussin 10 cm.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur totale 123 cm. Coussin 10 cm
Couleur	Blanc
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Mousse en polyéther. Elastique en élastodiène non tissé avec velcro. Paire de gants en vinyle.
Unité de vente	Emballage individuel (sous film PEBD 100μ)
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser si l'emballage est altéré avant utilisation. Une exposition à la lumière et la chaleur provoque un vieillissement de la mousse (elle peut devenir marron) ne garantissant plus sa capacité d'absorption. Utiliser un autre coussin hémostatique si la mousse est jaunie. Le coussin hémostatique est un dispositif médical qui doit être donc traité comme un déchet de soin. Si la date limite d'utilisation est dépassée, ne pas utiliser ce dispositif car les éléments peuvent être moins performants. Si le dispositif est défectueux, utiliser un autre coussin.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3005903100
Référence fabricant (MPN)	6005CHPP
Etanche	Non


Références

Réf. 304099 Coussin hémostatique Coupe Hém + 10 cm

Photos



Coussin hémostatique Coupe hém

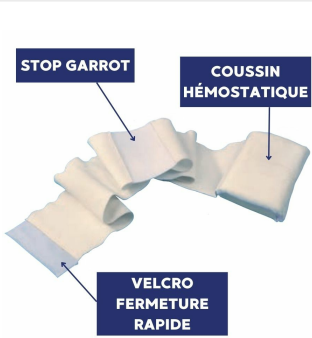

Coussin hémostatique Coupe hém



Coussin hémostatique Coupe hém



Coussin hémostatique Coupe hém



Coussin hémostatique Coupe hém