

Lève-patient

Samsoft ELITE 180



**Fiable,
Intuitif et Compact,
conçu pour une utilisation
optimale**



Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Samsoft ELITE 180

Usage à domicile ou en collectivité

Palonnier ergonomique minimisant les risques de chocs lors du transfert.

Structure robuste et sécurisante.



Large poignée de poussée ergonomique multiposition.

Télécommande aimantée permettant de la fixer en tout point du dispositif.

**Grande amplitude de levage :
de 470 à 1780 mm.
Facilite le ramassage au sol.**

Ouverture utile :
(au centre des longerons)
897 mm (version M)
991 mm (version E)



Disponible en version écartement électrique

Garde au sol : 27 mm
pour faciliter le passage des seuils de porte.

Pédale d'écartement pour une manipulation **optimisée**.

Blocage des longerons aisé en position ouvert ou fermé.

Roues à double galets, Ø 100 mm.
Haut niveau de roulage et solidité.

Samsoft **ELITE 180**

Pliage rapide, facile et sûr




Propose **de série** une **gâchette de verrouillage/déverrouillage du mât**, pour une double sécurité

Système magnétique de maintien et de blocage en rotation du palonnier pour un transport sécurisé.

 **Sans outil**


Pliage en quelques secondes sans aucun démontage. Le palonnier s'insère dans le mât à l'aide de la télécommande. Le vérin reste protégé par la structure. **Peut se ranger contre un lit, pour un gain de place.**

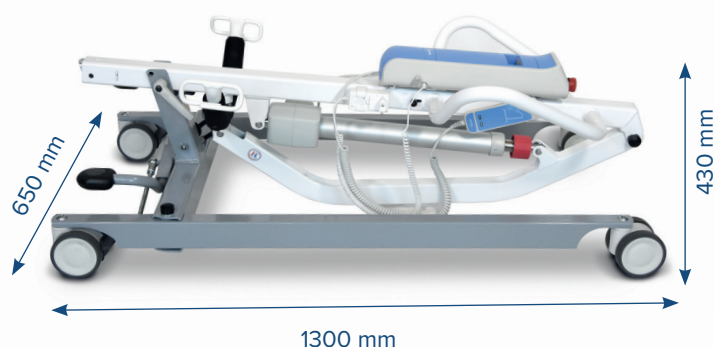

Peut également être démonté en deux parties pour faciliter son transport.



Boîtier d'alimentation

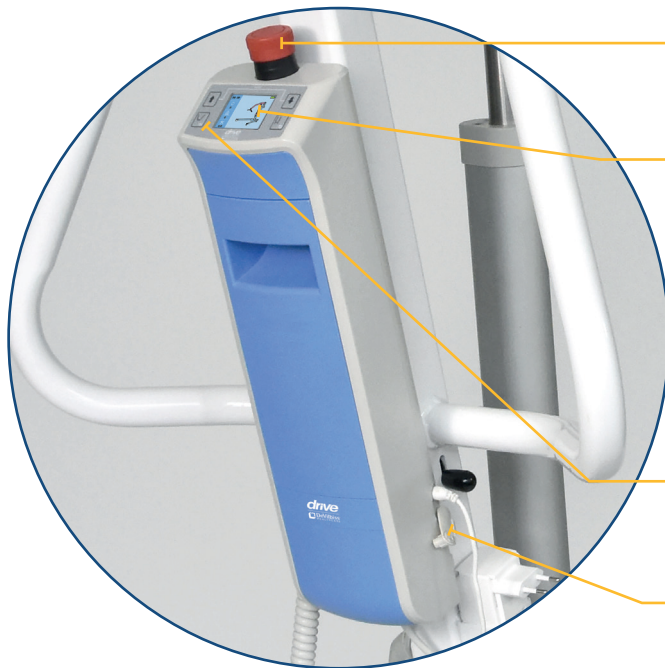

Bouton d'arrêt d'urgence, positionné pour éviter tout déclenchement intempestif.

Écran LCD couleur avec de **nombreuses fonctionnalités** : enregistrement des incidents, rappel des opérations de maintenance, niveau de charge de la batterie.



Boutons de fonctionnement, une alternative à la télécommande.

Étanchéité IPX6 : permet une utilisation dans un environnement avec des projections d'eau.

Alimentation


Batterie Lithium-ion, légère, durable et ultra compacte.

Recharge de la batterie, 2 possibilités : sur socle ou directement sur prise secteur.

En branchant directement l'appareil à une prise secteur murale grâce au chargeur intégré **ou** à distance en enlevant la batterie pour la connecter sur la station de charge, pour continuer à utiliser le lève-patient avec une deuxième batterie.



Batterie
garantie 1 an
Poids : 680 g

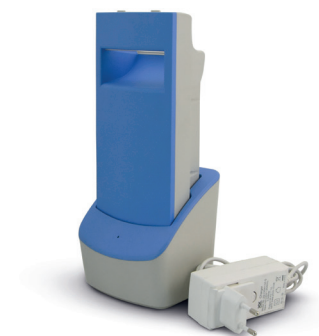

Vendu en accessoire

Sécurité

Validé conforme à la norme ISO 10535:2021 par un **organisme indépendant reconnu** (CERAH).



Palonnier 4 points alignés de série équipé de crochets recourbés anti retour, assurant un accrochage simple et sécurisé.



Garantie 5 ans
sur structure
et vérin*



Garantie 2 ans
sur boîtier
et télécommande*



Garantie 1 an
sur la batterie*



En flashant ce QR Code, vous avez accès à :

- La notice d'utilisation du dispositif.
- Un MODOP sur les bonnes pratiques de maintenances prévisionnelles.
- Des vidéos et tutoriels d'utilisation.


Haute visibilité des éléments de sécurité

- 1 Descente d'urgence
- 2 Bouton d'arrêt d'urgence
- 3 Axe de blocage du mât



* Dans le cadre d'une utilisation normale suivant les instructions de la notice. Sont exclus de la garantie les négligences ou les erreurs de manipulation.

Accessoires

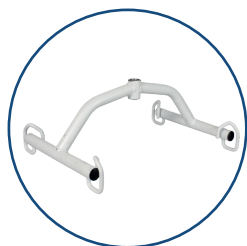

Palonnier 4 points
déportés
Réf. : SR3120700



Manchon de protection,
compatible avec les deux
versions de palonnier
Réf. : SR3143900



Station de charge
de la batterie
Réf. : SR3131900



Batterie
supplémentaire
Réf. : SR3132000

Sangles

Sangles disponibles au catalogue :

- sangle polyester confort,
- filet bain,
- hamac filet bain,
- hamac filet toilette.



Voir notre documentation
en ligne directement
en scannant ce Flash Code

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence du  Samsoft ELITE 180	Écartement manuel (M)	SR3110100
	Écartement électrique (E)	SR3110200
Capacité de levage		180 kg
Hauteur de levage mini (palonnier 4 points alignés)		470 mm
Hauteur de levage maxi (palonnier 4 points alignés)		1780 mm
Largeur hors-tout de la base (longerons fermés)		650 mm
Longueur hors-tout		1300 mm
Hauteur de la base (châssis)		120 mm
Diamètre de giration		1430 mm
Garde au sol		(M) : 27 mm (E) : 26 mm
Écartement intérieur des longerons		(M) : 1003 mm** (E) : 1120 mm**
Niveau sonore		< 55 dB (A)
Durée de vie du dispositif		10 ans
Poids net de l'appareil (sans palonnier)		(M) : 39,8 kg (E) : 40,2kg

Le SAMSOFT ELITE 180 est un dispositif alimenté par batterie permettant de transférer par un soulèvement un patient à mobilité réduite. Il peut être manipulé par un professionnel de santé ou un particulier formé.



Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

S 046 0924 2

** +3/-4

Cachet du distributeur



Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr

