

DONJOY®

IsoFORM™

PROTÈGE ET STABILISE
LA COLONNE VERTÉBRALE



enovis™


DONJOY®

Corsets IsoFORM™

Contention et soutien du rachis


Conçus pour protéger et stabiliser le rachis lombaire et dorsal, les corsets IsoFORM™ DonJoy® soutiennent la colonne vertébrale et soulagent la douleur.

Pour un soulagement supplémentaire, intégrez des compresses chaudes/froides (en option) directement dans les pochettes prévues à cet effet.

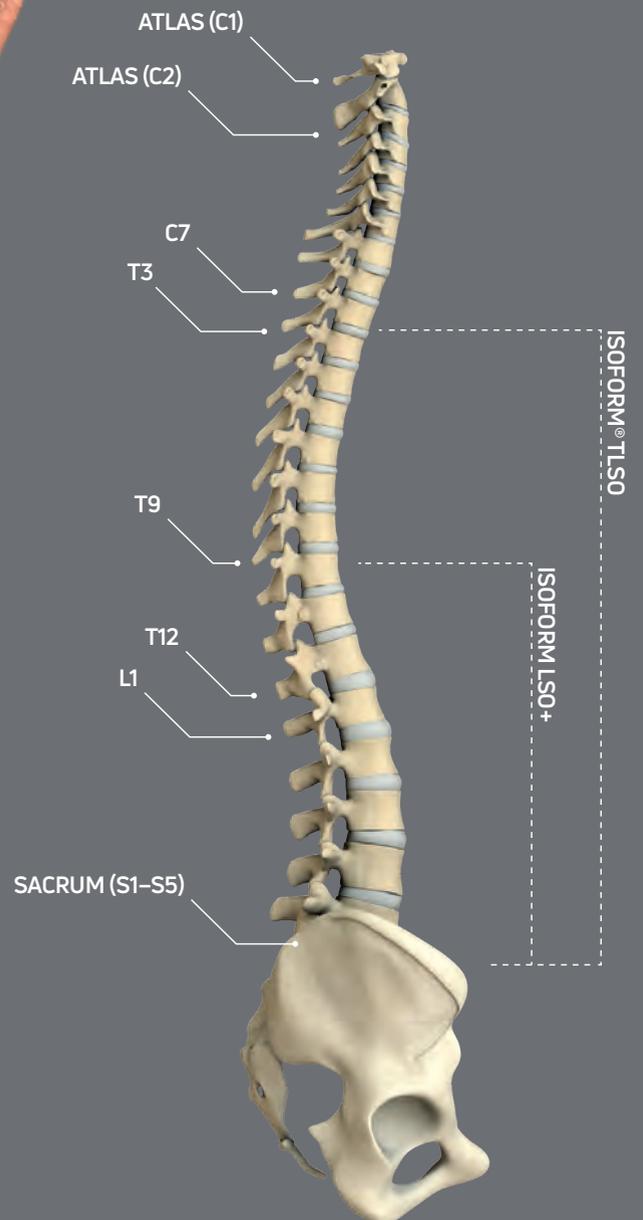

ZONE ANATOMIQUE
CONCERNÉE

Développés pour être ajustables, assurer une compression ciblée, et garantir le confort du patient

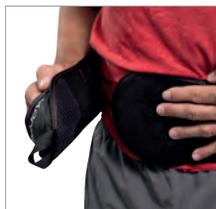

Ailettes latérales réglables

- S'adaptent aux différentes silhouettes pour un ajustement personnalisé



Panneau antérieur

- Fournit un support rigide et durable



Double languette de serrage

- Fournit une compression ciblée indépendante



Languettes de serrage ajustables

- Pour une utilisation facile avec longueur de lacet réglable



Passe-doigts

- Aide à faciliter la mise en place



Taille universelle (S/M et L/XL)

- S'adapte à la circonférence de taille de 71 à 152 cm




Textile respirant Spacer

- Durable et respirant



Pack chaud/froid en option

- Pour un soulagement supplémentaire

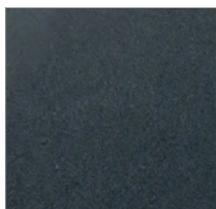

Panneaux doublés

- Offrent un soutien confortable



Panneau de laçage fermé

- Protège le système de laçage contre les accrocs ou les déchirures

IsoFORM® LSO+



Indications

- Soutien et stabilisation du rachis lombaire
- Lombalgies aiguës et chroniques
- Entorses lombaires

Caractéristiques

- Panneau postérieur rigide et plastron antérieur amovible
- Offre un contrôle et un soutien sagittal de T9 à S1
- Deux extensions latérales semi-rigides amovibles pour réduire les mouvements latéraux

Compression ciblée

- Système à double laçage assurant une compression indépendante en haut et en bas
- Panneau de laçage fermé protégeant le système contre les accrocs ou les déchirures

Confort du patient

- Passe-doigts facilitant la mise en place
- Tirettes flexibles facilitant l'utilisation de la sangle réglable



Taillage semi-universel S/M et L/XL

DESCRIPTION	TAILLE	LARGEUR DE HANCHE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
IsoFORM® LSO+	S/M	71-122 cm	11-1696-2	0190446640301
	L/XL	122-152 cm	11-1696-4	0190446640318
Pack Chaud / Froid (en option)			11-1699	0190446693888

Prescrire : **IsoFORM® LSO+ DonJoy®** - Remboursé S.S. - 167,69€ T.T.C. - L.P.P.R. 201E00.5

Prescrire : **Pack de Chaud/Froid DonJoy®** - Non Remboursé S.S.



Découvrez la vidéo de mise en place d'une IsoFORM® LSO+ DonJoy

IsoFORM® TLSO

Indications

- Fractures de compression de la colonne thoracique
- Ostéoporose
- Dorsalgies thoraciques mécaniques et cyphose

Caractéristiques

Support personnalisable

- Barre sternale télescopique en aluminium, réglable pour un ajustement personnalisé
- Plastron antérieur rigide aidant à restreindre la flexion et la rotation du tronc
- Panneau postérieur rigide permettant de limiter l'extension et la rotation du tronc (T3-S1)
- Extensions latérales semi-rigides amovibles permettant de réduire le mouvement latéral
- Ailettes latérales avec inserts plastiques amovibles englobant le torse pour une stabilisation ajustée
- S'adaptent à différentes silhouettes pour un ajustement personnalisé

Compression ciblée

- Système à double laçage assurant une compression indépendante en haut et en bas
- Panneau de laçage fermé protégeant le système contre les accrocs ou les déchirures

Confort du patient

- Facilité de mise en place et de retrait grâce aux boucles pivotantes à dégagement rapide
- Options de configuration de la sangle au niveau de l'épaule ou de l'aisselle
- Passe-doigts facilitant la mise en place
- Tirettes flexibles facilitant l'utilisation de la sangle réglable



Deux configurations de sangles
en option, configuration de sangles
au-dessus de l'épaule ou sous les bras



Panneau postérieur permet de limiter les mouvements

Panneau de laçage fermé protège le système de laçage
des accrocs ou des déchirures indésirables

Système de laçage double avec compression indépendante
en haut et en bas





Tirettes

pour faciliter l'utilisation
de la sangle réglable

Boucles pivotantes à dégagement rapide

pour un enfilage
et un désenfilage facilités

Barre sternale en aluminium

la barre télescopique peut être réglée
à la hauteur souhaitée.
Elle est confortable,
pour un ajustement personnalisé

Ailettes latérales semi-rigides

encadrant le torse
pour un soutien accru
(inserts amovibles pour un soutien
personnalisable)

Extensions latérales

semi-rigides permettant de réduire
les mouvements latéraux
(inserts amovibles pour un soutien
personnalisable)

Plastringe antérieure

aide à limiter la flexion antérieure et la
rotation du tronc



Taillage semi-universel S/M et L/XL

DESCRIPTION	TAILLE	LARGEUR DE HANCHE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
IsoFORM® TLSO	S/M	71-122 cm	11-1698-2	0190446640394
	L/XL	122-152 cm	11-1698-4	0190446640400
Pack Chaud / Froid (en option)			11-1699	0190446693888

Prescrire : **IsoFORM® TLSO DonJoy®** - Remboursé S.S. - 167,69€ T.T.C. - L.P.P.R. 201E00.5

Prescrire : **Pack de Chaud/Froid DonJoy®** - Non Remboursé S.S.



Découvrez la vidéo
de mise en place d'une
IsoFORM® TLSO DonJoy



Retrouvez-nous en ligne

WEB | BLOG | DJO SELECT | CEFARTENS | YOUTUBE | LINKEDIN

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France
Fabricant : DJO, LLC | 1430 Decision Street | Vista | CA 92081-8553 | USA

