

## Zetuvit® stérile

### Pansement absorbant



| Référence | Taille ou dimensions | Code EAN boîte |
|-----------|----------------------|----------------|
| 413651    | 10 x 10 cm           | 4049500413008  |
| 413652    | 10 x 20 cm           | 4049500413015  |
| 413653    | 15 x 20 cm           | 4049500413022  |
| 413654    | 20 x 25 cm           | 4049500243728  |

### Produit

Pansement absorbant stérile à usage unique, conforme, recouvert d'un nontissé afin d'éviter l'adhérence à la plaie. Conditionné non plié. Dos hydrophobe qui évite le relargage de liquide, reconnaissable par un liseré bleu.

**Les pansements Zetuvit® stériles sont conformes aux exigences de la LPPR.**


### Indications / Classification

Utilisé sur des plaies exsudatives pour absorber les fluides corporels (exsudat, sang, pus). Il peut également être utilisé pour la protection mécanique (rembourrage ou amorti) et comme barrière mécanique (protection contre la contamination externe) sur les plaies exsudatives et non exsudatives.

Le pansement peut rester en place pendant plusieurs jours et doit être fixé à l'aide d'un matériel de fixation approprié. Destiné aux professionnels de santé et non professionnels de santé.

Zetuvit® stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

### Spécifications

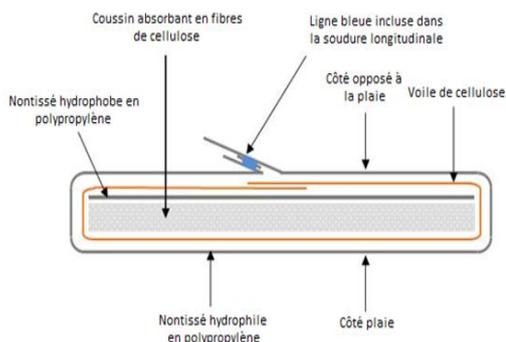

#### Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, recouvert à l'arrière d'un nontissé hydrophobe et perméable à l'air. Un voile de cellulose permettant la distribution des sécrétions entoure cette partie centrale. Le tout est enveloppé dans un nontissé non adhérent et hydrophile.

Le dos est caractérisé par un fil de couleur bleue.

#### Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 50 g/100 cm<sup>2</sup> de coussin absorbant (selon norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2).

Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement.

Absence de colophane\*

Remboursé LPPR.

\*(non ajouté intentionnellement).

| Référence | Taille ou dimensions produit | Caractéristiques spécifiques  |
|-----------|------------------------------|---|
| 413651    | 10 x 10 cm                   | Dimensions du pansement : 10,5 x 12,4 cm env.<br>Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm env.<br>Surface utile d'absorption : 100 cm <sup>2</sup> env.<br>Poids du pansement : 4,5 g env.  |
| 413652    | 10 x 20 cm                   | Dimensions du pansement : 10,5 x 22,4 cm env.<br>Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm env.<br>Surface utile d'absorption : 200 cm <sup>2</sup> env.<br>Poids du pansement : 9 g env.    |
| 413653    | 15 x 20 cm                   | Dimensions du pansement : 15,5 x 22,4 cm env.<br>Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm env.<br>Surface utile d'absorption : 300 cm <sup>2</sup> env.<br>Poids du pansement : 13 g env.   |
| 413654    | 20 x 25 cm                   | Dimensions du pansement : 20,5 x 27,4 cm env.<br>Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm env.<br>Surface utile d'absorption : 500 cm <sup>2</sup> env.<br>Poids du pansement : 21,5 g env. |

## Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette papier/papier pelable.  
Conditionnement en boîte puis en carton.

| Référence | Taille ou dimensions produit | Nb unités / pochette | Nb pochettes / boîte | Nb boîtes / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 413651    | 10 x 10 cm                   | 1                    | 10                   | 6                  | 77                   |
| 413652    | 10 x 20 cm                   | 1                    | 10                   | 6                  | 55                   |
| 413653    | 15 x 20 cm                   | 1                    | 10                   | 6                  | 35                   |
| 413654    | 20 x 25 cm                   | 1                    | 10                   | 6                  | 24                   |

| Référence | Taille ou dimensions produit | Dimensions pochette | Dimensions boîte  | Dimensions carton  | Dimensions palette   |
|-----------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 413651    | 10 x 10 cm                   | 141 x 200 mm        | 151 x 61 x 206 mm | 320 x 200 x 225 mm | 1200 x 800 x 1732 mm |
| 413652    | 10 x 20 cm                   | 141 x 300 mm        | 151 x 61 x 306 mm | 320 x 200 x 325 mm | 1200 x 800 x 1780 mm |
| 413653    | 15 x 20 cm                   | 195 x 300 mm        | 206 x 61 x 306 mm | 392 x 222 x 325 mm | 1200 x 800 x 1775 mm |
| 413654    | 20 x 25 cm                   | 245 x 350 mm        | 256 x 61 x 356 mm | 392 x 373 x 276 mm | 1200 x 800 x 1806 mm |

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Stérilisation

A la vapeur d'eau.  
Durée de vie : 5 ans.

## Précautions d'emploi

L'emballage (pochette pelable) contient du latex naturel au niveau des soudures susceptible de provoquer des réactions allergiques.  
Le produit ne doit pas être découpé.

## Conseils d'utilisation

La face arrière (face opposée à la plaie) est reconnaissable par son ruban de couleur bleue.