




MediSet® Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20G

Set de soins

Référence GTIN
478911 3261480001780

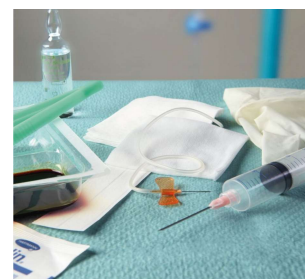

(photo non contractuelle)

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la pose d'une perfusion à domicile sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20G. Les accessoires le constituant sont disposés dans un ordre déterminé, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

MediSet® Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20G est un assemblage de dispositifs conforme à l'Article 22 du Règlement Européen 2017/745.

Spécifications

Composition :

Dans une boîte :

- 1 blister rigide stérile, qui contient (du haut vers le bas) :
 - 1 carré absorbant
 - 2 masques de soins
 - 1 charlotte
 - 2 gants d'examen
 - 1 champ de soin
 - 10 compresses en nontissé
 - 1 champ de soin troué
 - 2 gants d'examen
 - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %
 - 1 seringue 20 ml LL
 - 1 seringue 10 ml LL
 - 2 aiguilles 18 G 1 1/2
 - 1 aiguille de Huber sécurisée
 - 1 robinet 3 voies
 - 1 bandelette adhésive double
 - 1 pansement
 - 1 notice d'emploi

Hors blister :

- 1 sac à déchets

Spécifications des composants :

- Carré : nontissé en fibres de cellulose - 55 g/m² - 30 x 20 cm
- Masques : 3 épaisseurs - nontissé bleu 100% polypropylène - attaches élastiques sans latex - barrette nasale acier gainé de polypropylène - BFE > ou = 98%
- Charlotte : nontissé polypropylène - coloris bleu - 10 g/m² - élastique sans latex
- Gants d'examen : en nitrile - non poudré - ambidextre - manchette retournée - coloris bleu/violet - Taille M
- Champ : 2 couches : nontissé polypropylène et film polyéthylène - 36 g/m² - 45 x 50 cm - bleu
- Compresses : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm



- Champ troué : 2 couches : nontissé polypropylène et film polyéthylène - 36 g/m² - 34 x 45 cm - trou excentré 10 cm - petits adhésifs - fente prédécoupée 6 cm - bleu
- Seringues : 3 pièces centrées - 10 ou 20 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Aiguilles : aiguille hypodermique 18G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - embase : polypropylène - canule pointée : acier inoxydable - rose - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Ampoule : NaCl 0,9% - ampoule autocassable col large en verre de type I - 20 ml - pour rinçage et purge - stérilisation à la vapeur
- Aiguille de Huber : aiguille courbe avec clamp - 20 G - 20 mm - aiguille : acier inoxydable - tube de protection : polyéthylène - sans site d'injection - connexion Luer Lock femelle : PVC rigide - tubulure : PVC sans DEHP - clamp : polyoxyméthylène - sous emballage apyrogène - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Robinet : robinet 2 embouts Luer Lock femelle avec bouchons verrouillables protecteurs et 1 embout Luer Lock mâle mobile - clé et capuchon : polyéthylène / bouchon : polypropylène / corps : polycarbonate - partie mobile : polycarbonate - silicone - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Bandelette : nontissé blanc en polyester / cellulose - masse adhésive acrylique - papier protecteur siliconé - 100 x 12,5 mm
- Pansement Hydrofilm® : film : polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 12,5 cm
- Sac à déchets : Sac avec liens coulissants - non imprimé - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L - blanc

Ces dispositifs sont remboursés dans le cadre de forfaits de consommables LPPR - consultez les sur www.ameli.fr.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Nombre de blisters / boîte : 1

Nombre de boîtes / carton : 10

Nombre de cartons / palette : 66

Dimensions du blister : 290 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 141 x 46 x 291 mm

Dimensions du carton : 304 x 249 x 304 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Précautions d'emploi

Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants et liquides.

Accessoires de perfusion : Un contact prolongé avec la Chlorhexidine 2%/Alcool Isopropylique 70° sans temps d'évaporation, et alors que le luer lock est connecté donc sous contrainte physique, présente un risque important de fissuration du luer lock, et doit être évité dans toute la mesure du possible.

En accord avec les recommandations en cours de la SF2H une désinfection des connectiques (lorsqu'elle est nécessaire) avec de l'alcool éthylique à 70° est toujours préférable, car tout aussi efficace sur le plan de la désinfection de matériaux inertes et avec beaucoup moins de risque d'altération des matières plastiques.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil, à une température comprise entre 15 et 30°C et à une humidité relative comprise entre 0 et 80%.