

ottobock.

La famille Start

Qualité qui s'inscrivent dans la tradition

Quality for life





Sommaire

Aperçu des produits	6
Start M1	8
Start M2S	10
Start M2	12
Start M2 Hemi	14
Start M4 XXL	16
Start M6 Junior	18
Options et accessoires	21

La famille Start

Qualité qui s'inscrivent dans la tradition

Les attentes des utilisateurs par rapport aux dispositifs médicaux techniques sont aussi complexes que leurs besoins individuels et leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, grâce au retour des experts et des patients, nous avons effectué des modifications ciblées permettant de vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin. Les modèles Start sont convaincants d'une part en raison de leurs diverses options de soutien pour différents groupes cibles, et d'autre part en raison de leur durabilité et de leurs normes de qualité élevées.

Avantages de la famille Start

- Une variété de produits incomparables dans le segment des fauteuils légers
- Adaptation individuelle aux besoins de l'utilisateur
- Variante de stockage immédiatement disponible ou variante configurable individuellement
- Délais de livraison optimisés
- Normes de qualité élevées
- Nombreuses options supplémentaires sont disponibles
- Les équipements basés sur des indications, telles que "Hemi"





La famille Start

Aperçu des produits



- **Start M1 – Variante d'entrepôt**
Fauteuil roulant pliant léger disponible en 3 variantes



- **Start M2S – Variante d'entrepôt préconfigurées**
Fauteuil roulant pliant léger disponible avec des roues standard ou des freins à tambour



- **Start M2 – Le modèle configurable**
Fauteuil roulant pliant léger



► **Start M2 Hemi –**
Le modèle configurable
Fauteuil roulant pliant léger



► **Start M4 XXL –**
Le modèle pour les
tailles spéciales
Fauteuil roulant pliant léger



► **Start M6 Junior –**
Le modèle pour les enfants
Fauteuil roulant pliant léger

Poignées de poussée
antibactériennes**

Accoudoir réglable en
hauteur (3 niveaux),
réglable en profondeur
et pivotant vers le haut

Aide au basculement
intégrée dans le châssis

Support de repose-pieds
pivotant, palettes séparées



Start M1

Variante d'entrepôt

Le Start M1 représente l'entrée dans le segment des poids légers. Il se caractérise avant tout par sa grande facilité d'entretien, ce qui le rend particulièrement adapté à la réutilisation. De plus, le cadre en aluminium assure un faible poids mort avec une charge utile de 125 kg. Ainsi, le Start M1 est également convaincant en termes de poids. Le fauteuil roulant léger est disponible en trois versions : du produit de base à la version entièrement équipée.

Caractéristiques

- Châssis et mains courantes en aluminium
- Reglage de la profondeur d'assise: 20 mm
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Accoudoir réglable en hauteur (3 niveaux)
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en polyuréthane
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Freins à levier
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Frein à tambour pour accompagnateur
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

Options

- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Accoudoir : pivotant vers le haut, réglable en hauteur (10 niveaux), réglable en profondeur

Données techniques

Largeur d'assise	de 380 à 505 mm
Hauteur d'assise avant / arrière	de 460 à 510 / de 450 à 500 mm
Profondeur d'assise	400 / 420 mm
Longueur totale	de 943 à 1.015 mm
Largeur totale	de 570 à 695 mm
Hauteur total	945 mm
Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.	1.015x310x975 mm
Hauteur du dossier	de 400 à 420 mm
Longueur de tibia	de 390 à 490 mm (sans coussin)
Poids de transport à partir de*	9,5 kg
Poid env.	14,6 kg
Charge utile maximale	125 kg

* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

Couleur châssis



Gris clair
métallique

Équipement		sans freins à tambour	avec freins à tambour	avec un ensemble d'équipements
Roues motrices	24" standard	*		
	24" avec freins à tambour		*	*
Roues directrices	8" pneus à bandages (200x50 mm)	*	*	*
Axes fourches	Standard	*	*	*
Accoudoirs	Hauteur réglable par outil	*	*	
	Réglable en hauteur			*
Couleur châssis	Argent métallisé	*	*	*
Croisillon	Standard	*	*	*
Dossier	Dossier à courbure lombaire	*	*	*
Poignées de poussée	Standard	*	*	*
Toile de dossier	Standard	*	*	
	Economy Ergo (à 5 sangles)			*
Anti-basculer	En pièce jointe			*
Porte-canne	À droite			*
Ceinture de sécurité	En pièce jointe			*
Coussin	En pièce jointe			*



Start M2S

Variante d'entrepôt préconfigurées

Avec le "Start M2S", vous pouvez choisir entre deux variantes d'entrepôt. Le "S" signifie "stock". Grâce à une chaîne logistique optimale, tous les modèles sont rapidement disponibles et donc utilisables. L'adaptateur de la roue motrice peut être tourné de 180°, ce qui offre la possibilité d'ajuster le centre de gravité. Donc, la roue motrice peut être fixée dans deux positions différentes.

Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Accoudoir réglable en hauteur (3 niveaux), réglable en profondeur, relevable
- Palier de tête de direction réglable
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Frein à tambour pour accompagnateur
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Toile de dossier Economy Ergo, (réglable en tension avec 5 sangles)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

Options

- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Flasques
- Accoudoir : pivotant vers le haut, réglable en hauteur (10 niveaux), réglable en profondeur

Données techniques

Largeur d'assise	de 380 à 530 mm
Hauteur d'assise avant	de 440 à 510 mm
Profondeur d'assise (par défaut)	430 mm
Plage de réglage	de 405 à 455 mm
Longueur totale	de 970 à 1.045 mm
Largeur totale	de 565 à 690 mm
Hauteur total	940 mm
Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.	1.045x310x990 mm
Hauteur du dossier	de 400 à 475 mm
Longueur de tibia	de 390 à 490 mm (sans coussin)
Poids de transport à partir de*	9,6 kg
Poid env.	14,7 kg
Charge utile maximale	130 kg

* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

Couleur châssis



Gris clair
métallique

Équipement		sans freins à tambour	avec freins à tambour
Roues motrices	24" standard	•	
	24" avec freins à tambour		•
Roues directrices	8" pneus à bandages (200x50 mm)	•	•
Accoudoirs	Hauteur réglable par outil	•	•
Accoudoirs	Argent métallisé	•	•
Dossier	Dossier à courbure lombaire	•	•
Toile de dossier	Economy Ergo (à 5 sangles)	•	•
Poignées de poussée	Standard	•	•
Croisillon	A partir d'une largeur d'assise de 53 cm, 1,5 fois	•	•



Start M2

Le modèle configurable

Ce modèle est exactement le bon choix pour les adaptations individuelles dans la gamme légère. Le Start M2 est un fauteuil roulant de haute qualité, entièrement configurable. Il est proposé dans diverses combinaisons de dimensions et de paramètres. Pour la première fois dans ce segment, nous proposons deux tailles de châssis différentes.

Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Palier de tête de direction réglable
- Freins à levier
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Palettes en plastique repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Toile de dossier Economy Ergo, (réglable en tension avec 5 sangles)
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

Options

- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Flasques
- Accoudoir : pivotant vers le haut, réglable en hauteur (10 niveaux), réglable en profondeur

Données techniques

Largeur d'assise	de 380 à 530 mm
Hauteur d'assise avant	de 440 à 510 mm
Profondeur d'assise (par défaut)	430/480 mm
Plage de réglage	de 405 à 505 mm
Longueur totale	de 970 à 1.045 mm
Largeur totale	de 565 à 690 mm
Hauteur total	940 mm
Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.	1.045x310x990 mm
Hauteur du dossier	de 400 à 475 mm
Longueur de tibia	de 350 à 490 mm (sans coussin)
Poids de transport à partir de*	9,6 kg
Poid env.	14,7 kg
Charge utile maximale	130 kg

* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

Couleur châssis



Gris clair
métallique



Start M2 Hemi

Version Hemi

Le Start M2 Hemi dispose de nombreuses options sélectionnables qui permettent une personnalisation. Ce fauteuil roulant est le bon choix, en particulier pour les patients AVC (hémiplegie) ou paralysie cérébrale.

Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Toile de dossier standard ou Economy Ergo (réglable en tension avec 5 sangles)
- Accoudoir réglable en hauteur (3 niveaux), réglable en profondeur, relevable
- Roues directrices avec pneus en polyuréthane (5" / 5,5" / 7" / 6" / 8")
- Palier de tête de direction réglable
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Elargissement de l'espace des pieds
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Poignées de poussée antibactériennes**
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

Options

- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Double main courante à commande unilatérale
- Freins à commande unilatérale
- Flasques

Données techniques

Largeur d'assise	de 380 à 530 mm
Hauteur d'assise avant	de 380 à 490 mm
Profondeur d'assise (par défaut)	430 mm
Plage de réglage	de 405 à 505 mm
Longueur totale	de 970 à 1.045 mm
Largeur totale	de 565 à 690 mm
Hauteur total	940 mm
Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.	1.045 x 310 x 990 mm
Hauteur du dossier	de 400 à 475 mm
Longueur de tibia	de 350 à 490 mm (sans coussin)
Poids de transport à partir de*	9,6 kg
Poid env.	14,7 kg
Charge utile maximale	130 kg

* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

** L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

Couleur châssis



Gris clair
métallique

Barre de stabilisation
(optionnel)

Accoudoirs avec manchettes
réglable en hauteur (optionnel)

Repose-jambes
relevables (optionnel)

Aide au
basculement
intégrée dans
le châssis

Freins à levier

Palettes repose-pieds
séparées, réglables en
inclinaison



Start M4 XXL

Le robuste parmi les fauteuils roulants légers

Les maladies de civilisation telles que l'obésité et le développement des tailles corporelles contribuent, entre autres, à une augmentation significative de l'approvisionnement de personnes avec un poids et une taille élevés. Le Start M4 XXL est le plus robuste des modèles légers. Avec ses roues motrices renforcées, il peut transporter jusqu'à 160 kg. Le cadre tubulaire en aluminium est synonyme de poids très faible et de qualité Ottobock complète (à partir de 17,5 kg de poids complet). Le rembourrage extrêmement durable résiste à toutes les exigences. La hauteur du dossier peut également être réglée ultérieurement de 400 à 475 mm. Les dimensions étroites du pliage avec fixation et le double croisillon stable ne laissent rien à désirer.

Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Double croisillon robuste
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Roues motrices avec rayons renforcés et axes à démontage rapide
- Dossier avec courbure lombaire, renforcé
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Freins à levier
- Accoudoirs réglable en hauteur
- Conception modulaire


Options

- Porte-canne
- Anti-bascule pendulaire
- Rallonge de levier de freins
- Tablette thérapeutique
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Barre de stabilisation de dossier

Données techniques

Largeur d'assise	de 430 à 580 mm
Hauteur d'assise avant / arrière	de 400 à 510 / de 380 à 500 mm
Profondeur d'assise	de 430 à 490 mm
Longueur totale	de 800 à 1.065 mm
Largeur totale	de 645 à 820 mm
Hauteur total	de 870 à 1.020 mm
Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.	< 350 mm
Hauteur du dossier	de 400 à 475 mm
Longueur de tibia	de 270 à 470 mm (sans coussin)
Poids de transport à partir de	12,5 kg
Poid env.	17,5 kg
Charge utile maximale	160 kg

Couleur châssis

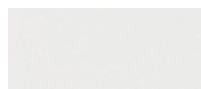

Blanc
RAL 9016



Noir profond
RAL 9005



Bleu glace
métallisé



Bleu saturne
métallique



Gris clair
métallique



Anthracite
métallique

Poignées de poussée réglables
en hauteur, coudées, amovibles
(optionnel)

Toile de dossier réglable
en tension par sangles

Accoudoirs avec manchettes
300 mm

Freins à levier

L'empattement peut être réglé
sur court / empattement actif
ou long / empattement passif.

Repose-jambes séparés, à angle
réglable avec des palettes en plastique.
En option, également disponible avec
une palette monobloc en aluminium à
angle réglable.

Le croisillon en aluminium
assure la stabilité et un
pliage facile.

Start M6 Junior

Le modèle des enfants

Le Start M6 Junior est un fauteuil roulant léger et pliable destiné aux enfants qui n'ont besoin d'un fauteuil roulant que pour une durée limitée. Les mains courantes permettent à l'enfant de se déplacer de manière autonome. Grâce à ses poignées de poussée réglables en hauteur, il peut également être utilisé comme fauteuil roulant de transport.

Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- La hauteur et l'inclinaison du siège sont réglables individuellement en fonction des besoins de l'enfant
- Palier de tête de direction réglable
- Empattement actif/passif, réglable
- Châssis en aluminium, pliable avec croisillon
- Couleur toiles: noir
- Accoudoirs avec manchettes 300 mm
- Roues motrices 20"-, 22"- ou 24", avec axes à démontage rapide
- Roues directrices 5"- ou 6"
- Fourches courtes ou longues
- Mains courantes en aluminium anodisé argent
- Freins à levier
- Palettes séparées et réglable en inclinaison

Options

- Toile de dossier réglable en tension par sangles en nylon noir
- Accessoires: anti-basculé enfichable, porte-cannes, anti-basculé pendulaire
- Freins à tambour pour accompagnateur
- Mains courantes en inox polis
- Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur
- Rallonge de levier de freins
- Dossier inclinable à 30°
- Poignées: réglables en hauteur, télescopiques ou réglables en hauteur, coudées, amovibles
- Accoudoirs avec manchettes 300 mm réglable en hauteur
- Repose-jambes relevables, sans compensation de longueur de tibia
- Palettes repose-pieds monobloc ou séparées pour petite longueur de tibia
- Flasques
- Tablette thérapeutique
- Coussin: Standard, Cubic Foam ou Evolight
- Autres option: Ceinture de sécurité à fermeture plastique, Kit outillage, Kit d'ancrage pour le transport en véhicule

Données techniques

Largeur d'assise	280 à 380 mm
Hauteur du siège avant / arrière	400 à 490 / 370 à 490 mm
Profondeur d'assise	310 à 370 mm
Hauteur du dossier	300 à 375 mm
Hauteur accoudoirs, réglable	bis 400 mm
Longueur de tibia	160 à 450 mm (sans coussin)
Charge utile maximale	90 kg

Couleur châssis



Jaune
RAL 1023



Rouge vif
RAL 3001



Vinho sparkle



Sparkle granny
smith



Options et accessoires



• Croisillon, 1,5 fois



• Anti-bascule enfichable



• Appuie-bras, disponibles dans la gamme d'accessoires



• Accoudoirs réglable en hauteur



• Rallonge de levier de frein



• Toile de dossier Economy Ergo



• Double main courante à commande unilatérale



• Accoudoirs rélevable



• Flasque



• Porte-canne



• Tablette thérapeutique



• Ceinture de sécurité



• Pelote thoracique latérale de la gamme d'accessoires



• Appuie-tête de la gamme d'accessoires



Pour d'autres options, veuillez vous référer aux fiches de commande correspondantes.

Matrice d'options / d'accessoires

	Start M1	Start M2S	Start M2	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Charge max						
90 kg						•
100 kg						
125 kg	•					
130 kg		•	•	•		
160 kg					•	
Crash test	•	•	•	•	•	•
Accessoires pour châssis						
Anti-bascule enfichable	•	•	•	•		•
Porte-canne	•	•	•	•	•	•
Roues directrices						
5" à bandages				•	•	•
5,5" Soft			•	•	•	
6" pneumatique						•
6" à bandages PU			•	•		
6" à bandages					•	•
7" pneumatique					•	
7" à bandages			•	•	•	
8" pneumatique, étroit (200x30 mm)					•	
8" pneumatique (200x50 mm)					•	
8" à bandages PU (200x50 mm)	•	•	•	•	•	
8" à bandages, étroit (200x30 mm)					•	
Elargissement de l'espace des pieds				•		
Taille des roues motrices						
20"						•
22"				•	•	•
24"	•	•	•	•	•	•
Empattement						
Empattement passif possible	•	•	•	•	•	•
Jantes						
Standard	•	•	•	•	•	•
Avec freins à tambour pour accompagnateur	•	•	•	•	•	•
Avec double main courante				•		
Pneus						
Pneumatiques 13/8"			•	•	•	•
Bandages PU 13/8"	•	•	•	•	•	•
Mains courantes						
Main courante en aluminium, anodisée argent, haute	•	•	•	•	•	•
Main courante en inox, polie, haute					•	•
Freins						
Frein à levier standard	•	•	•	•	•	•
Frein à levier pour utilisateur et accompagnateur					•	•
Frein à commande unilatérale, droit/gauche				•		
Accessoires des freins						
Rallonge de levier de freins, monté	•		•	•	•	•
Rallonge de levier de freins, en pièce jointe		•	•	•		

	Start M1	Start M2S	Start M2	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Système de dossier						
Dossier doté d'une courbure lombaire, standard	•	•	•		•	•
Dossier droit				•		•
Réglage de l'inclinaison du dossier 30° (uniquement hauteur 375 mm possible)						•
Dossier rabattable (uniquement hauteur 375 mm possible)						•
Hauteur de dossier						
300 mm						•
325 mm						•
350 mm						•
375 mm						•
400 mm	•	•	•	•	•	
420 mm	•					
425 mm		•	•	•	•	
430 mm						
450 mm		•	•	•	•	
475 mm			•	•	•	
Toile de dossier						
Standard	•		•		•	•
Economy Ergo (réglable en tension avec 5 sangles)	•	•	•			
Réglable (avec 7 sangles)					•	•
Poignées de poussée						
Standard – antibactériennes	•	•	•	•		
Barre de stabilisation				•	•	
Réglables en hauteur, télescopiques					•	•
Réglables en hauteur, coudées, amovibles						•
Accoudoirs						
Accoudoirs standard, manchettes 300 mm	•	•	•	•		
Accoudoirs standard, manchettes 300 mm, kurz montiert					•	•
Accoudoirs standard, manchettes 300 mm, lang montiert					•	•
Accoudoirs standard, manchettes 365 mm, kurz montiert					•	
Accoudoirs standard, manchettes 365 mm, lang montiert					•	
Accoudoirs réglable en hauteur, manchettes 300 mm	•	•	•	•	•	•
Accoudoirs enfichables					•	
Accoudoirs desk					•	
Toile d'assise						
Toile d'assise standard	•	•	•	•	•	•
Repose-jambes/Repose-pieds						
Palette monobloc (pour petit longueur de tibia)						•
Palette monobloc, réglable en inclinaison, aluminium					•	
Palettes séparées, réglable en inclinaison, en plastique	•	•	•	•	•	•
Palettes séparées (pour petit longueur de tibia)						•
Repose-jambes relevable (sans compensation de longueur de tibia)	•	•	•	•	•	•
Repose-moignon	•	•	•	•	•	



De nombreux accessoires indiqués ci-dessus (tels que les coussins et les appuie-tête) peuvent également être commandés pour des produits non configurables. Veuillez utiliser à cet effet notre vaste catalogue d'accessoires (646K12).

	Start M1	Start M2S	Start M2	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Coussins						
Standard	•	•	•	•	•	•
Cubic Foam					•	•
Evolight					•	•
Appuie-tête						
Ceintures						
Ceinture de sécurité (à fermeture plastique)	•	•	•			•
Ceinture de sécurité (à fermeture métallique)					•	
Flasques						
Flasques transparent			•	•	•	•
Accessoires						
Tablette thérapeutique				•	•	•
Sangles de talon pour palettes séparées			•	•	•	•
Couleur du châssis						
Anthracite métallique					•	
Gris clair métallique	•	•	•	•	•	
Noir profond RAL 9005					•	
Bleu glace métallisé					•	
Bleu saturne métallique					•	
Blanc RAL 9016					•	
Vinho sparkle						•
Jaune RAL 1023						•
Rouge vif RAL 3001						•
Sparkle granny smith						•



De nombreux accessoires indiqués ci-dessus (tels que les coussins et les appuie-tête) peuvent également être commandés pour des produits non configurables.
Veuillez utiliser à cet effet notre vaste catalogue d'accessoires (646K12).

Notes

Notes

Notes

