

Permobil

F3 Corpus[®]

KAFFEBROD	
Bullar	27
Wienerbröd	28
Gulbröd	33
Länglar	39
Wienerbröd	39
Kranse	41
Wienerkranse	45
Bergmullarkranse	45
Dovbröd	48
Kaffe	
Doppelpösl	135
Pajon, varm	48
Pajon, kalla	48
Kaffebröd	48



permobil

Fauteuil urbain compact

La conception compacte et l'agilité du F3 Corpus permettent aux utilisateurs de manœuvrer facilement dans les espaces étroits. Les suspensions *Smooth* du F3 garantissent à tout moment un grand confort lors des déplacements en milieu urbain.

Corpus - épouse les contours du corps

Le système d'assise Corpus présente un design ergonomique qui épouse les contours du corps. Confort accru, positionnement pelvien, stabilité latérale et immersion sont les principales caractéristiques des nouveaux coussins Corpus.

Les coussins Corpus sont dotés d'une mousse double densité plus moelleuse sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin Stretch-Air™, un tissu respirant et résistant à l'eau, lavable en machine à 60 °C.

Fonction *Active Reach*

Bascule le siège vers l'avant jusqu'à 30° et l'élève pour améliorer la portée fonctionnelle. Simplifie les transferts et la réalisation des activités quotidiennes.

Fonction *Active Height*


Permet de rouler à une vitesse maximale de 5 km/h en position haute. Se combine parfaitement avec la fonction *Active Reach* pour faciliter l'accès à votre environnement.

Inclinaison électrique du dossier

Inclinaison électrique sûre et sans à-coups avec réduction optimale de l'effet de cisaillement pour tous les utilisateurs jusqu'à 150 kg.

La programmation simplifiée

QuickConfig est une nouvelle application innovante conçue pour les techniciens de maintenance, les cliniciens et les prestataires de santé. Cette application offre un moyen plus simple de programmer le fauteuil. Une interface intuitive permet de configurer votre fauteuil afin de l'adapter à vos besoins, notamment avec vos préférences de conduite.

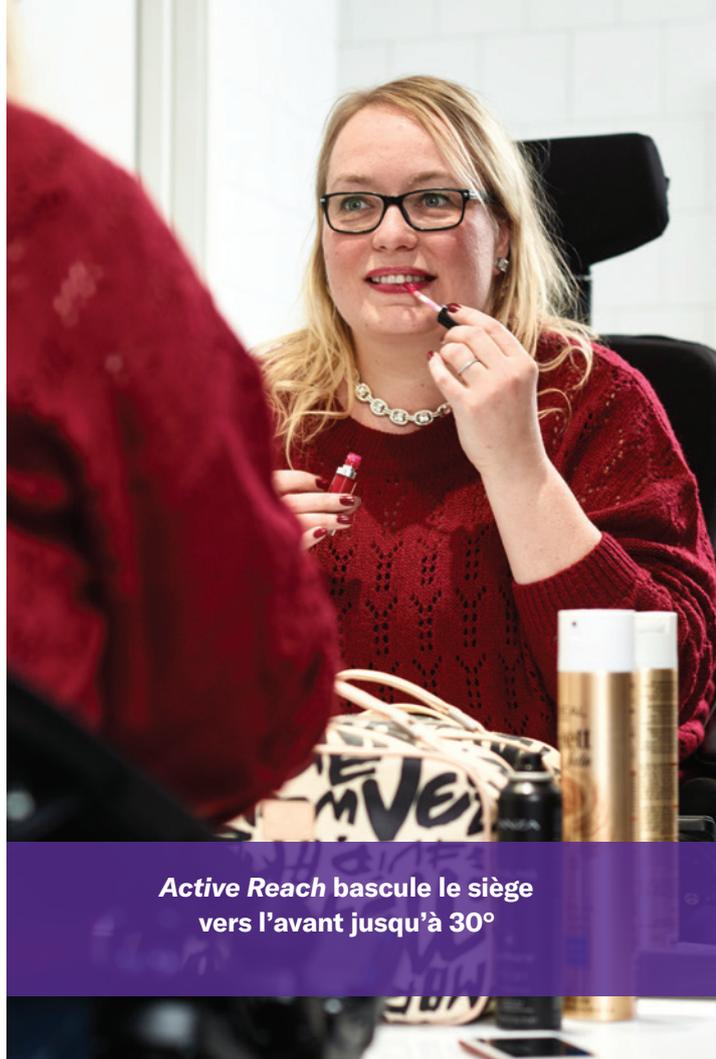

Active Reach bascule le siège vers l'avant jusqu'à 30°




L'inclinaison électrique avec réduction optimale de l'effet de cisaillement entre les positions

Caractéristiques techniques du F3 Corpus®

Vitesse maximale	10 km/h
Autonomie (batterie 85 Ah)	30-40 km*
Poids max. utilisateur	150 kg
Franchissement d'obstacle	60/75 mm
Rayon de giration minimum	1350 mm
Braquage dans les couloirs	1 040 mm
Suspension	Indépendante sur chaque roue
Electronique R-net avec Power Platform	120 A
Largeur, assise comprise	610 - 790 mm
Hauteur	970 - 1 170 mm
Longueur de transport min. sans/avec roulettes anti-basculer	790 - 890 mm
Hauteur de transport minimum (dossier replié)	825 mm
Poids, batteries 85 Ah incluses	185,6 kg
Poids des batteries 85 Ah	2x23,8 kg
Hauteur d'assise (avec élévateur électrique)	450-750 mm
Profondeur d'assise	370 - 570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur d'assise	420 - 570 mm (par incrément de 50 mm)
Largeur du dossier	360/410/460/510 mm
Hauteur du dossier	470, 545 - 670 mm (par pas de 25 mm)
Distance entre les accoudoirs	380 - 480/480 - 580 mm
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19 - système d'ancrage	Oui - Poids max. utilisateur 136 kg
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19 - sangles / attaches	Oui - Poids max. utilisateur 150 kg
Testé conformément à la norme EN 12182/EN 12184 CE	Oui

Personnalisez vos déplacements

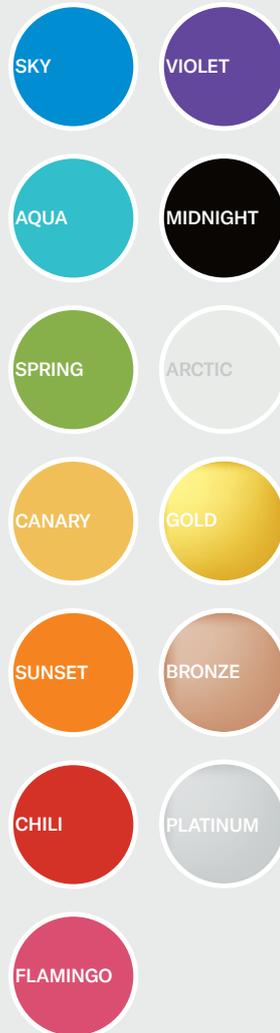

*Conditions de conduite et choix du type de batterie.
Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Les suspensions *Smooth* et la stabilité de ce fauteuil roulant électrique font toute la différence entre pouvoir rester une heure ou toute une journée dans le fauteuil.

Permobil

F3 Corpus[®]

En termes de taille, le F3 Corpus est le plus petit de notre famille de fauteuils roulants électriques à traction. Peu encombrant et agile, il se faufile aisément aussi bien dans les lieux publics très fréquentés (rues, centres commerciaux, etc.) que dans les petits appartements.

Le F3 Corpus offre un confort de conduite exceptionnel, ce qui vous permet de consacrer toute votre énergie à la réalisation de vos tâches quotidiennes.