

Permobil

M3 Corpus[®]



permobil

Osez plus

Le M3 Corpus® dispose d'un châssis compact d'une grande maniabilité dans les espaces étroits tout en offrant des performances extérieures remarquables. Il présente des fonctionnalités complètes et une grande stabilité dans différentes positions d'assise.

Corpus® – épouse les contours du corps

Le système d'assise Corpus® présente un design ergonomique qui épouse les contours du corps. Confort accru, positionnement pelvien, stabilité latérale et immersion sont les principales caractéristiques des nouveaux coussins Corpus.

Les coussins Corpus sont dotés d'une mousse double densité plus moelleuse sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin Stretch-Air™, un tissu respirant et résistant à l'eau, lavable en machine à 60 °C.

Fonction *Active Reach*

Incline le siège vers l'avant jusqu'à 20° et l'élève pour améliorer la portée fonctionnelle, facilite les transferts et la réalisation des activités quotidiennes.

Fonction *Active Height*


Permet de rouler à une vitesse maximale de 5 km/h en position haute. Se combine parfaitement avec la fonction *Active Reach* pour faciliter l'accès à votre environnement.

Inclinaison électrique du dossier

Inclinaison électrique sûre et sans à-coups avec réduction optimale de l'effet de cisaillement pour tous les utilisateurs jusqu'à 150 kg.

La programmation simplifiée

QuickConfig est une nouvelle application innovante conçue pour les techniciens de maintenance, les cliniciens et les prestataires de santé. Cette application offre un moyen plus simple de programmer le fauteuil. Une interface intuitive permet de configurer votre fauteuil afin de l'adapter à vos besoins, notamment avec vos préférences de conduite.

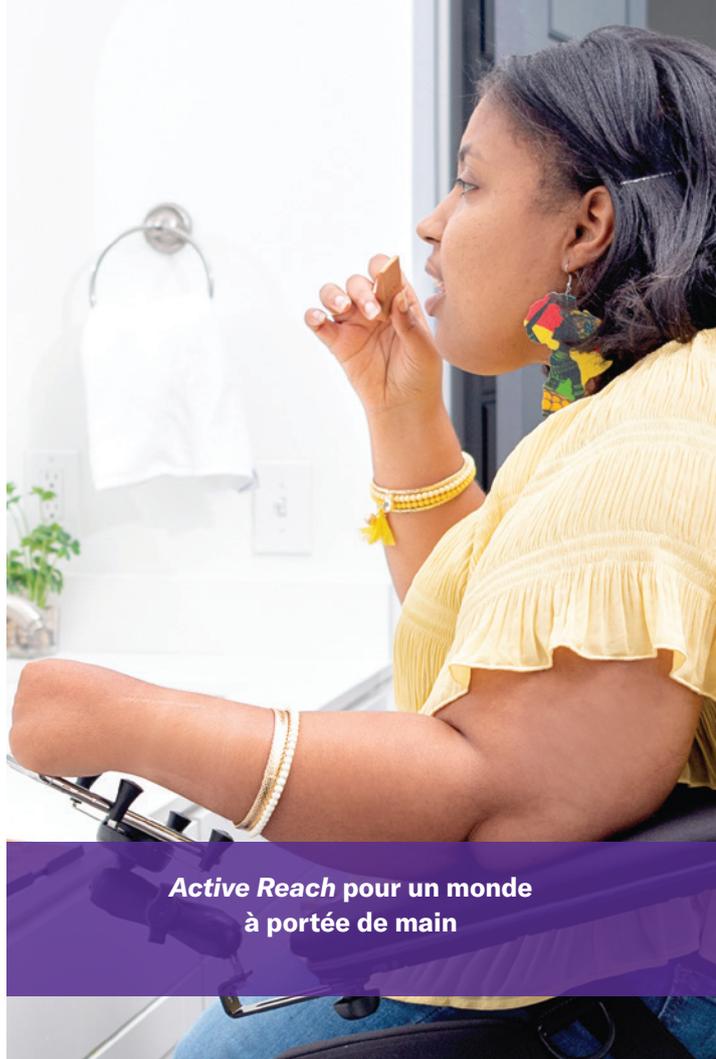

Active Reach pour un monde à portée de main




L'inclinaison électrique avec réduction optimale de l'effet de cisaillement entre les positions

Caractéristiques techniques du M3 Corpus®

Personnalisez vos déplacements

Vitesse maximale	10 km/h
Autonomie de conduite (batteries 85 Ah)	30-40 km*
Poids max. utilisateur	150 kg
Franchissement d'obstacles (avec élan)	50 mm (75 mm)
Diamètre de giration minimum	1120 mm
Braquage dans les couloirs	1 100 mm
Suspension	Smooth
Electronique R-net avec Power Platform	120 A
Largeur, assise comprise	650-790 mm
Hauteur	960-1 170 mm
Longueur de transport minimale	855 mm
Hauteur de transport minimum (dossier replié)	825 mm
Poids, batteries 85 Ah incluses	176 kg
Poids des batteries 85 Ah	2 x 23 kg
Hauteur d'assise (avec lift)	450-750 mm
Profondeur d'assise	370 - 570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur d'assise	420 - 570 mm (par incrément de 50 mm)
Largeur du dossier	360/410/460/510 mm
Hauteur du dossier	470, 545 - 670 mm (par incrément de 25 mm)
Distance entre les accoudoirs	380 - 480/480 - 580 mm

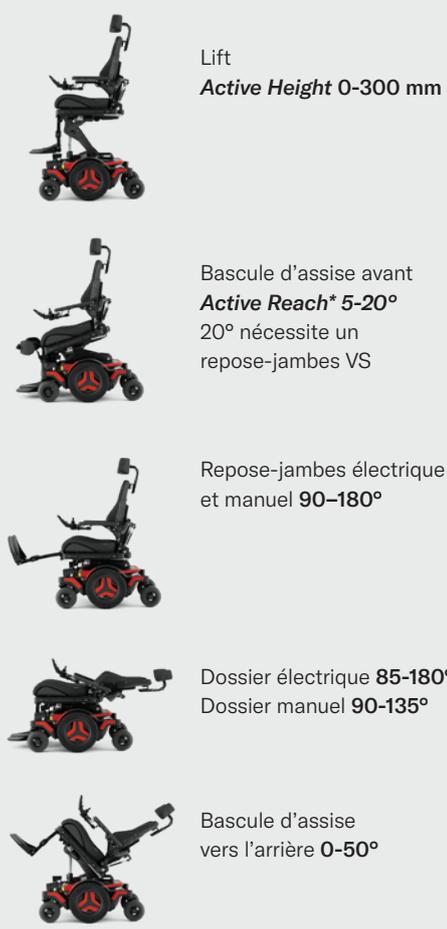

*Conditions de conduite et choix du type de batterie.
Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Découvrez l'avantage
incomparable de l'accès
à l'environnement.

Permobil

M3 Corpus[®]

Conçu avec une grande minutie,
le M3 Corpus offre fiabilité, confort
et grande maniabilité tout en
permettant un meilleur accès
à l'environnement.

Le M3 Corpus vous offrira plus
de liberté, tout simplement.

