

EDGE 3

EDGE 3 présenté en coloris Blue jean,
équipé du lift iLevel et de la Q-LOGIC 3
avec Bluetooth®

LIFT iLEVEL®
30 CM DE SÉRIE
7,2 KM/H



Spécifications

| | |
|--|---|
| ROUES MOTRICES | 14" pneumatiques ou bandages |
| ROUES AVANT ET ARRIERES | Bandages 6" |
| VITESSE MAXIMUM ¹ | Jusqu'à 9,6 km/h Jusqu'à 7,2 km/h (avec le iLevel activé) |
| GARDE AU SOL | 6,9 cm (bac batteries) |
| RAYON DE GIRATION ² | 52,1 cm |
| LONGUEUR HORS TOUT ² | 82 cm (sans palettes) |
| LARGEUR HORS TOUT | 62,2 cm |
| TAILLES D'ASSISE | |
| TRU-Balance® 3 Bascule d'assise Électrique | Largeur: 30,5 - 55,9 cm Profondeur: 30,5 - 55,9 cm |
| TRU-Balance® 3 Bascule d'assise et iLevel® | Largeur: 30,5 - 55,9 cm Profondeur: 30,5 - 55,9 cm |
| Assise TRU-Balance® Flex | Largeur: 38,1 - 55,9 cm Profondeur: 30,5 - 50,8 cm |
| HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE ⁶ | |
| TRU-Balance® 3 Bascule d'assise Électrique ⁵ | 44,5 - 49,5 cm |
| TRU-Balance® 3 Bascule d'assise et iLevel® ⁵ | 44,5 - 49,5 cm |
| Assise TRU-Balance® Flex | 41,9 - 49,5 cm |
| INCLINAISON MANUELLE | Oui |
| BATTERIES ³ | NF-22 (2) |
| POIDS DE LA BATTERIE ⁷ | 17,24 kg chacune |
| ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE ⁸ | 120A Q-Logic 3 EX |
| CHARGEUR | 8A Externe |
| MOTEURS | 2-Pôles, Mid-Wheel 6® |
| POIDS MAX UTILISATEUR ⁴ | 136 kg |
| POIDS DE BASE | 63 kg |

- 1) La vitesse peut varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge, l'état des batteries et la pression des pneus.
- 2) Sans palettes
- 3) La capacité des batteries peut varier selon l'utilisation et/ou l'ajout de fonctions électriques.
- 4) La capacité maximum du poids de l'utilisateur est définie en fonction de l'assise choisie.
- 5) Les mesures ont été prises avec une assise en 46x46 cm avec +/- 3mm, une assise fixe, des roues à bandages et un poids-utilisateur de 136 kg (il faut rajouter 100mm avec des roues pneumatiques). Contactez votre service client pour avoir des détails. Les mesures indiquées sont prises dans la position la plus basse, et n'incluent pas le système d'élévation électrique de l'assise.
- 6) La hauteur sol-plaque d'assise de 41.90cm n'est pas possible avec le lift iLevel ou la bascule d'assise électrique.
- 7) Le poids des batteries peut varier de +/- 1.4 kg d'après les données fournisseur.
- 8) Tous les fauteuils Quantum Rehab® peuvent être commandés avec des commandes spéciales.

Caractéristiques Standards

- SRS amélioré (Souplesse des suspensions)
- 7,2 km/h avec le lift iLevel® de 30 cm
- Chargeur USB au manipulateur : inclus
- Nouveaux coloris
- Inserts de roues centrales de la même couleur que le châssis : inclus
- Et toujours de série : la bascule d'assise électrique 50° et le dossier électrique biomécanique




Nouveaux Coloris



BLUE
JEAN



CHERRY
BOMB

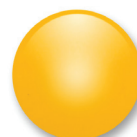

LEMON
CRUSH



GREEN
MACHINE



RASPBERRY
BERET



EVOLUTION
ORANGE



CARBON
FIBER

*Retrouvez l'ensemble des coloris disponibles sur notre site quantumrehab.fr



TRU

BALANCE® 4

POWER POSITIONING SYSTEMS
WITH ANTERIOR TILT



TRU-Balance® 4
présenté sur Edge 3
Stretto



APPUI PECTORAL



MAINTIEN DE GENOUX



RELEVÉ-JAMBES ELECTRIQUE A COMPENSATION



Proclive présentée sur Edge 3 Stretto

Proclive à :

10° | 20° | 30°

Jusqu'à 8 mémoires de positions personnalisables

Relève-jambes à compensation et descente au sol pour faciliter les transferts

Disponible sur :
Edge 3 Stretto, Q6 Edge 3 et 4Front 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles d'assises (largeur x profondeur) en cm : minimum 41 x 35 - maximum 56 x 56

Proclive 0-30° avec intervalles de 0-10°, 0-20° et 0-30°

Bascule d'assise de 0 à 50°

Inclinaison de dossier : 85°-165°

Compensation du relève-jambes : 0-18,4cm

Articulation du relève-jambes à compensation : 85-165°

VITESSES DE CONDUITE EN POSITION PROCLIVE SUR TRU-BALANCE 4

Jusqu'à 10° de proclive et 30,5cm de lift : 3,21km/h

Proclive 10-20°, lift jusqu'à 15,2cm : 0,8 km/h

Proclive 10-20°, lift au-delà de 15,2cm : blocage de sécurité de la conduite

Au-delà de 20° de proclive : blocage de sécurité de la conduite



Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 . Fax: 04 28 29 60 45
quantumrehab.fr . contact@quantum-rehab.fr



EU_SSQ0014/FR/15/05/2023