

LE TRIPLE WHEELS

LE TRIPLE WHEELS VOUS FACILITE LA VIE

SOWECARE



SOWECARE

le facteur humain

LeTriple[®] Wheels

LeTriple Wheels vous permet d'aller réellement plus loin. La première différence visible de LeTriple Wheels, c'est son look. Ce n'est, bien entendu, pas la seule différence. LeTriple Wheels a su associer au style contemporain de nombreuses fonctionnalités. Que votre mobilité se détériore ou simplement que vous soyez dans un mauvais jour, un fauteuil « trippel » classique pourrait ne pas suffire. LeTriple Wheels, alliant les mouvements aux fonctionnalités d'un siège, le tout vous offrant une assise confortable, est LE fauteuil qu'il vous faut.



UNE MOBILITÉ FLEXIBLE

LeTriple Wheels est facile à transporter et peut aussi bien avancer son siège que l'étirer.

Les roues arrière à ressort de LeTriple Wheels permettent de franchir les obstacles extérieurs tels que les bosses facilement et en toute sécurité. Facile à utiliser, le frein à main se fonde parfaitement dans le design du siège. En outre, les large roues vous garantissent une parfaite maniabilité et une excellente souplesse, même dans de petits espaces.


LE MONDE À PORTÉE DE MAIN

LeTriple Wheels est un siège que vous pouvez utiliser toute la journée, que ce soit lors des repas, lorsque vous travaillez sur l'ordinateur ou lorsque vous désirez prendre quelque chose dans le placard de la cuisine. Grâce à son élévation électrique supplémentaire haut – bas, tout devient possible avec LeTriple Wheels. À l'instar d'un siège « trippel », travailler en hauteur est simple et sûr avec LeTriple Wheels. La hauteur du siège est réglable électriquement de 40 cm à 74 cm ! Le siège s'élèvera tout seul, tout en conservant une base stable garantissant au siège un maintien ferme au sol.

RÉGLAGES

Au delà de la multitude de solutions fonctionnelles proposées par LeTriple Wheels, il est également entièrement réglable. La largeur et la profondeur du siège ainsi que les accoudoirs se règlent en toute simplicité. De plus, grâce à sa conception modulaire, LeTriple Wheels s'adapte entièrement à vos besoins personnels. À cette conception, vous pouvez ajouter toute une gamme d'options fonctionnelles.

réglage électrique haut – bas : de 43 cm à 77 cm

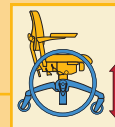


réglage du siège, inclinaison : 3° en avant/ 5° en arrière




réglage du siège : dossier ajustable de 82° à 107°



largeur : soit 45 cm soit 50 cm

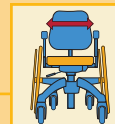


le siège peut être avancé de 2,5 cm

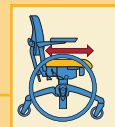

les accoudoirs sont repliables




la longueur des accoudoirs peut se régler sur 10 cm ou 20 cm

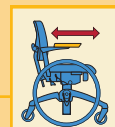

dossier pivotant



dossier réglable en hauteur de 17 cm à 30 cm

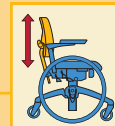

frein



charge maximale : 125 kg



L'ENSEMBLE DES PRODUITS CRÉÉS PAR SOWECARE LE TRIPLE ET CONÇUS ET DÉVELOPPÉS PAR
FIRST BV ET PRODUITS PAR SOWECARE ONT POUR POINT D'ORGUE L'ÊTRE HUMAIN.

SOWECARE BV

10 Twentelaan, NL-7609 RE Almelo

Tél. +31 (0) 546 493 145, Fax +31 (0) 546 493 251

info@sowecare.nl, www.sowecare.nl

SOWECARE 

le facteur humain