

Q300 M Mini Kids

Imaginez les Possibilités



LE FAUTEUIL LE PLUS ÉTROIT POUR LES ENFANTS EN ACTION !

C'est une réalité de la vie. Les enfants grandissent. Et vite. Plus vite que leurs vêtements et plus vite que leur fauteuil électrique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Q300 M MINI KIDS, un fauteuil électrique qui suit la croissance des enfants !

Avec un **système d'assise réglable**, qui s'ajuste en **profondeur** et en **largeur**; grandir ne signifie plus qu'il faille s'adapter à un nouveau fauteuil. Au contraire, le **Q300 M Mini Kids** s'adaptera à votre enfant de 10 ans comme il le faisait à 6 !

Bien sûr, il ne serait pas mini sans sa **base motrice ultra-étroite** et super maniable de **520 mm** pour se faufiler dans les endroits les plus étroits.

Que ce soit à l'école, au cinéma ou au parc avec des amis, il offre toutes les performances pour les grands espaces (sans la taille !). De plus, le **C-Me** permet à votre enfant de conduire avec le siège surélevé à la vitesse de la marche, pour qu'il puisse aussi suivre ses amis !



Scannez le QR code pour plus d'information.





520 MM
LARGEUR



TECHNOLOGIE ROUE MOTRICE CENTRALE

Le Q300 M MINI Kids offre un rayon de giration minimal avec une traction et une stabilité accrues grâce à sa technologie de roues motrices centrales.



560 mm
RAYON DE GIRATION COMPACT

PETITS ESPACES? BASE ROUE MOTRICE CENTRALE IDÉALE!

Des salles de classe encombrées aux couloirs mouvementés, le Q300 M MINI Kids est si ridiculement compact et maniable, qu'il s'adaptera facilement à la vie quotidienne (et non l'inverse).





1060 mm

LONGUEUR BASE MOTRICE

Grâce à sa longueur totale ultra-courte, le Q300 M Mini Kids emprunte facilement les plus petits ascenseurs et les espaces restreints. Il est également suffisamment léger (à partir de 130 kg) pour être compatible avec la plupart des ascenseurs.

410 mm


HAUTEUR D'ASSISE

Si bas, le Q300 M Mini Kids se glisse sans effort sous les tables de classe avec une hauteur d'assise à partir de seulement 410 mm (avec module d'assise fixe) et 430 mm (avec le module lift et bascule d'assise électrique).



SUPPORT DE COMMANDE ESCAMOTABLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Manipulateur pas à la bonne position? Ce support de commande offre 3 positions : vers l'extérieur (pour se rapprocher des tables), vers l'intérieur (pour les enfants avec une dextérité des mains limitée) et la position de conduite standard.

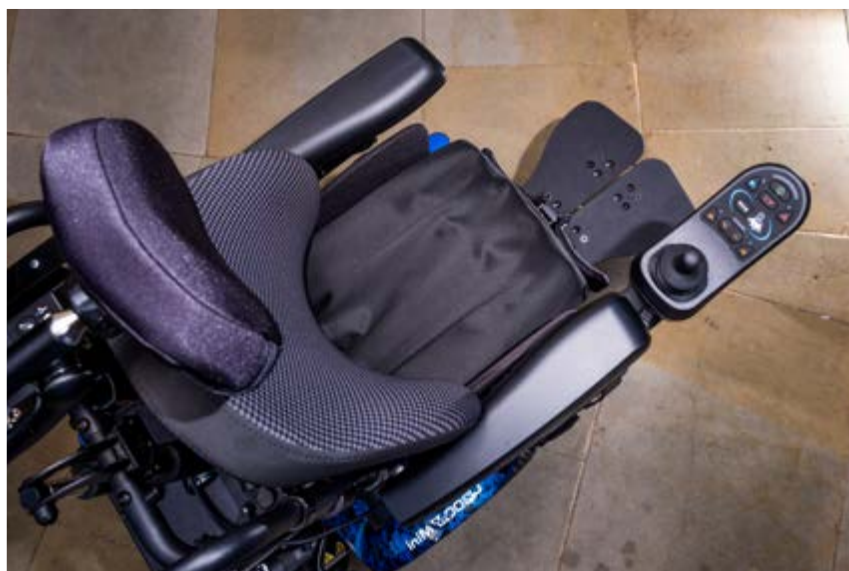

RAPPROCHEZ-VOUS GRÂCE À LA POTENCE CENTRALE

Remplacez les repose-pieds latéraux traditionnels par une potence centrale, pour que votre enfant puisse s'approcher des objets, passer sous les tables, et bénéficier d'un rayon de braquage plus court !

GRANDES PERFORMANCES

Voici un fauteuil électrique compact avec de GRANDES performances en extérieur. Étroit et agile dans une ville bondée, et doté d'une tonne de fonctionnalités pour l'extérieur.

70 mm

FRANCHISSEMENT

Pas de bête de trottoir en vue ? Le Q300 M MINI Kids peut franchir des trottoirs jusqu'à 70 mm de hauteur, ce qui vous évite de devoir prendre le chemin le plus long.



36 km AUTONOMIE

Alimenté par des batteries de 56 Ah, il vous permettra d'aller partout où vous le souhaitez sans avoir à vous dépêcher de revenir, avec une autonomie pouvant atteindre 36 km.

UNE MEILLEURE TRACTION POUR S'ATTAQUER AUX OBSTACLES

Obtenez la meilleure traction, la meilleure stabilité et le meilleur franchissement d'obstacles avec les roues motrices de 14". Elles permettent également de garder un fauteuil compact de seulement 570 mm.

TECHNOLOGIE ANTI-PITCH

Traditionnellement, lorsqu'un fauteuil électrique s'arrête sur une pente, le mouvement d'arrêt secoue votre enfant vers l'avant. Nous avons résolu ce problème grâce à la technologie Anti-Pitch, afin qu'il reste en sécurité et stable dans son siège.



SUSPENSIONS INDÉPENDANTES

Grâce à notre système de suspension BREVETÉ à toutes les roues, les six roues restent en contact avec le sol lors de la montée et la descente d'obstacles. Les chocs et les bosses sont absorbés par la suspension, votre enfant bénéficie d'une conduite souple et douce.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE AVEC DES MOTEURS PLUS EFFICIENTS

Les moteurs Performances du Q300 M MINI Kids offrent une réponse plus percutante aux sollicitations de conduite et une plus grande capacité à affronter les terrains difficiles. Plus durable, plus efficace et plus performante, la technologie de nos moteurs est incomparable.



UNE ASSISE QUI ÉVOLUE AVEC VOTRE ENFANT.

Grandir ne signifie pas renoncer à un fauteuil électrique. Nous avons conçu l'assise du Q300 M MINI Kids pour que vous n'ayez pas à craindre les poussées de croissance de votre enfant. Réglable en largeur (280-400 mm) et en profondeur (260-400 mm), il est idéal pour ceux qui ont besoin d'une largeur d'assise étroite, mais d'un ajustement plus important de la profondeur au fil du temps.



APPUI-TÊTE

Compatible avec les appui-têtes **SEDEO** et **WHITMYER**, le support d'appui-tête du Q300 M MINI Kids couvre un grand nombre de besoins en matière de soutien et de positionnement de la tête, du plus simple au plus complexe.





REPOSE-PIEDS Z-FINITY

Réglage en continu entre **160 mm** au-dessus de l'assise jusqu'à **480 mm** au-dessous. Ces repose-pieds offrent un soutien aux enfants en pleine croissance. Son support pivotant permet de régler à l'infini l'angle et l'emplacement des palettes (pour un positionnement idéal des pieds, des chevilles et des genoux).




DOSSIER SEDEO LITE DEEP CONTOUR

Enveloppement profond pour le confort, les supports latéraux sont également intégrés à l'intérieur du dossier. Ainsi, non seulement, ils assurent une stabilité constante du tronc, mais ils ne bougeront pas et ne glisseront pas au fil du temps.

DES BESOINS DE POSITIONNEMENT SPÉCIFIQUES ?

Le cadre d'assise du Q300 M MINI Kids est compatible avec le dossier de positionnement JAY J3. Pour répondre à des besoins cliniques modérés à élevés, le dossier J3 offre un éventail très vaste de tailles, de formes et d'options pour adapter l'assise à votre enfant.

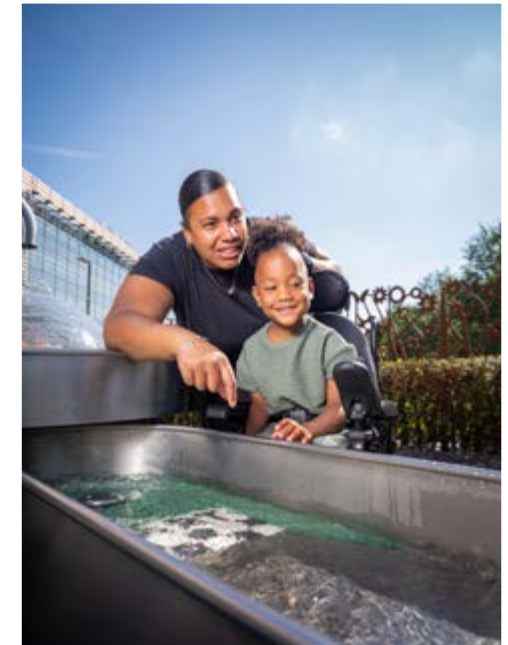

SE DÉPLACER TOUT EN CONFORT !

Le Q300 M MINI Kids ne se contente pas d'offrir de GRANDES performances au fauteuil, il est également doté de GRANDES fonctionnalités pour répondre aux besoins cliniques et au mode de vie.



50°





MANIPULATEUR R-NET ADVANCED

Offrez lui le meilleur de la technologie embarquée avec ce manipulateur grand écran HD facile à lire et des touches simples à activer. Avec les fonctionnalités Bluetooth et i-device intégrées, il pourra commander la télévision, son téléphone et d'autres appareils à partir de son Q300 M Mini Kids.



TILT-IN-SPACE

Ajuster la position assise de votre enfant tout au long de la journée grâce à une inclinaison électrique jusqu'à 50°. Il est important de soulager les points de pression en redistribuant le poids du corps du coussin au dossier. Ainsi, votre enfant maintiendra une position assise confortable avec un effort musculaire réduit.

REPOSE-JAMBES ÉLECTRIQUES

En relevant et en abaissant les jambes, ces repose-jambes aident à améliorer la circulation. En s'ajustant en longueur, la position assise reste constante, évitant ainsi les mouvements indésirables du bassin.

COMBINÉ LIFT & BASCULE D'ASSISE ÉLECTRIQUE

Grâce au lift de 300 mm, l'enfant peut atteindre des objets du quotidien, qui sans lift seraient hors de portée. Votre enfant peut se transférer plus facilement grâce à une position plus élevée pour se lever. De plus, avec une bascule d'assise de 30°, il peut s'asseoir et profiter d'une meilleure relaxation et répartition de la pression.



S'ÉLEVER ET CONDUIRE AVEC C-ME

Avec C-Me, votre enfant peut s'élever jusqu'à 300 mm et conduire jusqu'à 4,5 km/h en même temps! Votre enfant peut désormais suivre ses amis à leur rythme et être à leur hauteur, le tout en appuyant sur un simple bouton, sans avoir besoin de s'arrêter.



UN CONFORT ACCRU EN CONDUITE SURÉLEVÉE

Contrairement à d'autres fauteuils électriques, notre suspension ne se bloque pas lors de l'utilisation de la fonction C-Me, pour une conduite toujours aussi douce et confortable sur les terrains accidentés, même en position surélevée ! De plus, la technologie anti-pitch garantit stabilité et sécurité sur les pentes.





ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ

L'arrêt est une question de sécurité. Le boîtier d'arrêt à distance permet à un accompagnateur d'arrêter le fauteuil roulant électrique par le biais d'une télécommande RF à une distance maximale de 30 mètres (en fonction de la localisation).



S'ÉLEVER PENDANT LA CONDUITE AVEC DES BOUTONS ASSIGNABLES

Grâce à nos boutons assignables brevetés, il est désormais possible de modifier la fonction de n'importe quel bouton, ou d'assigner une deuxième fonction pour activer C-Me même en conduisant.



JEUNE ET RAYONNANT.

Disponible avec 12 nouveaux motifs de carénage!
Coordonnez-les ou contrastez-les avec 7 couleurs
d'inserts pour les roues motrices et directrices afin
d'obtenir le mélange parfait.



CARÉPAGE:



INSERT:



Vous souhaitez quelque chose d'unique? Built-4-Me peut vous aider à créer un **Q300 M MINI Kids** vraiment personnalisé et hors du commun!



UNIQUE EN SON GENRE

Notre équipe Built-4-Me peut personnaliser l'assise avec une variété de couleur d'habillage unique.



CARÉNAGE PERSONNALISÉ

Presque tout type de dessin peut être "imprimé" et être transposé sur le carénage par notre département Built-4-Me.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise	280 - 400 mm
Profondeur d'assise	260 - 400 mm
Hauteur d'assise	410 - 470 mm
Hauteur de dossier	380 - 485 mm
Longueur de jambes	180 - 510 mm
Bascule d'assise électrique	0 - 50° / 0 - 30° / -5 - 25°
Largeur totale	à partir de 520 mm (avec roues 12")
Longueur totale (avec potence centrale)	1060 mm
Rayon de giration	560 mm
Pente de sécurité maximale	6°
Franchissement max.	50 mm (avec roues motrices 12") 70 mm (avec roues motrices 14")
Autonomie maximale (ISO 7176-4)	Jusqu'à 25 km (avec batteries 41 Ah) Jusqu'à 36 km (avec batteries 56 Ah)
Poids produit (avec batteries)	A partir de 103 kg
Poids maximum Utilisateur	75 kg
Roues motrices	12" / 13" / 14"
Vitesses maximales	6 km/h / 10 km/h
Batteries	41 Ah / 56 Ah
Electronique	R-NET
Crash testé	Oui - approuvé pour le transport face à la route dans un véhicule (ISO 7176-19). Fixation : 4 points de fixation du siège avec 2 sangles doubles à l'arrière et 2 sangles simples à l'avant. Les ceintures de sécurité à ancrage ne sont pas autorisées. La facilité d'accès et de manœuvre dans les véhicules dépend de la taille du fauteuil roulant.
Transport à vide	Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule (voiture ou avion, par exemple)..
Usage prévu et environnement	Pour personne à mobilité réduite, usage intérieur/extérieur. Fauteuil roulant de classe B



Scannez le QR code pour accéder à la vidéo du Q300 M Mini Kids.

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie,
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00

E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr