

Deux NOUVEAUX fauteuils au design élégant !
Introduction des DOSSIERS et
COUSSINS JAY SYNCRA pour répondre
à la majorité des besoins cliniques !



Q700M

Q700F

SEDEO PRO ADVANCED

COUCHÉE



RELAX



LIFTÉE
(Fonction
C-Me)



BASCULE
D'ASSISE



PERFORMANCES DES BASES MOTRICES

BASE 6 ROUES MOTRICES CENTRALES - Q700 M

- Rayon de giration réduit, meilleure performance intérieure
- Conduite intuitive, tourne sur lui-même
- Technologie anti-pitch, limite l'effet de tangage
- Traction optimale, poids sur les roues motrices
- Fonction C-Me, conduite à 4.8 km/h en position liftée

BASE 4 ROUES, TRACTION - Q700 F

- Grande maniabilité, encombrement faible
- Stabilité optimale
- Traction augmentée, centre de gravité sur les roues motrices
- Fonction C-Me, conduite à 4.8 km/h en position liftée
- Confort de conduite, suspensions indépendantes

SEDEO PRO ADVANCED - BÉNÉFICES

- Multi-réglable, largeur, profondeur, repose-pieds ...
- Assise avec mémoires de positions
- Offre complète de dossiers et coussins cliniques :
Jay Syncra, dossier Sedeo Flexible, Jay J3
- Accoudoirs multi-réglables et relevables
- Nouveau design, élégant et épuré

COUSSIN JAY SYNCRA

- S'adapte aux mouvements du bassin lors de l'inclinaison
- Gouttière fémorale profonde
- Insert mousse visco ou insert fluide JAY avec technologie JAY Cryo

DOSSIER JAY SYNCRA


- Réglage indépendant: largeur et hauteur
- Bord inférieur échancré: meilleure posture pendant l'inclinaison
- Housse esthétique et confortable

SUPPORTS LATÉRAUX

- Supports fixes pour dossier JAY Syncra
- Conçus pour un montage sous le coussin de dossier JAY Syncra
- Contours profilés avec ajustement à l'utilisateur
- Réglage en hauteur sur 70% de la coque du dossier



SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO ADVANCED

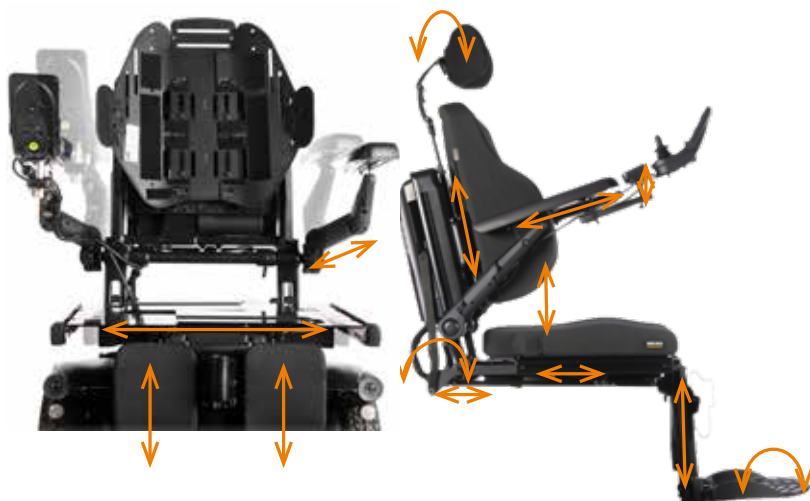

COUSSIN & DOSSIER JAY SYNCRA

Exclusivement conçu pour le système d'assise
SEDEO® PRO ADVANCED



DONNÉES TECHNIQUES

Crash test selon ISO 7176-19



	Q700 M Q700 F - Sedeo Pro Advanced
Poids max. Utilisateur	160 kg
Largeur d'assise réglable	380 - 560 mm
Profondeur d'assise réglable	400 - 560 mm
Hauteur d'assise	430 - 480 mm
Inclinaison de dossier	85° - 175°
Lift et bascule d'assise	300 mm - 0° à 50°
Motorisation	6 km/h 8 km/h 10 km/h
Franchissement	Q700 M : 75 mm Q700 F : 70 mm (roulettes position basse) Q700 F : 90 mm (roulettes position haute)
Batteries	60 Ah 80 Ah
Autonomie (ISO7176-4)	40 km

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».



www.SunriseMedical.fr



Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél : 02 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr