

Q50 R

Rangez-le partout, Allez où vous voulez.



PRÉPAREZ-VOUS À VOYAGER AVEC LE Q50 R.

Découvrez le **QUICKIE Q50 R**, le fauteuil roulant électrique qui se plie très facilement en quelques secondes, à la taille d'une valise ! Rangez-le où vous voulez, et allez où vous voulez avec votre Q50 R.

Vous avez besoin d'un fauteuil roulant électrique mais les fauteuils au châssis imposant ainsi que leurs batteries lourdes ne vous conviennent pas. Si vous souhaitez un fauteuil qui se transporte facilement dans un coffre ou en train, le **QUICKIE Q50 R** est le modèle parfait.

Le Q50R a tout ce dont vous pourriez avoir besoin ! Roues bandage 8" et 12" avec garde-boue, système de double amortisseur, accoudoirs rabattables avec verrouillage de la position, dossier démontable et réglable en hauteur avec une toile réglable en tension, coussin, barre de poussée rembourrée, pochette de dossier avec zip, batterie au lithium... Il vous permettra de parcourir jusqu'à **50 km*** tout en confort.

** Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d'énergie en un fauteuil roulant.*



Scannez le QR code avec votre téléphone pour regarder la vidéo.

NOTRE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE LE PLUS FACILE À TRANSPORTER !

La facilité de transport de son châssis combinée à la facilité avec laquelle ce fauteuil se replie, en quelques secondes, en font... le modèle idéal pour vous accompagner dans vos voyages.



800 mm

400 mm

SYSTÈME DE PLIAGE ET DE TRANSPORT SIMPLE

Le Q50 R se plie en quelques secondes, tout aussi facilement qu'une poussette. Il suffit de relever le clip à l'arrière, de replier le repose-pieds et de pousser le dossier vers le bas. Sans effort et sans avoir besoin d'outils ou de retirer la batterie.



DANS LE COFFRE... AUCUN PROBLÈME

Son poids de **37.5kg** et ses dimensions réduites le rendent très maniable pour le décharger d'un coffre de voiture de n'importe quelle taille, sans avoir besoin de rampes spéciales ou d'un véhicule adapté. Vous pouvez même retirer la batterie pour réduire encore son poids à seulement **32 kg**.



Scannez le QR code avec votre téléphone pour regarder la vidéo.

MANIABILITÉ EN INTÉRIEUR

Vous voudrez l'avoir tout le temps avec vous, que vous soyez à la maison, en train de faire du shopping, dans les transports publics... La taille compacte et la maniabilité précise du Q50 R - grâce à son manipulateur intuitif qui répond avec une grande précision aux mouvements du joystick - vous permettront de vous déplacer facilement dans n'importe quelle situation, même si l'espace est restreint.



BASE COMPACTE

Vous craignez de heurter les meubles et les coins de votre maison avec votre fauteuil roulant ? Ne le soyez pas, avec seulement **600 mm** de largeur totale, vous pouvez facilement passer par des portes étroites ou manoeuvrer dans des espaces restreints.

FACILITÉ DE TRANSFERT

Vous pouvez facilement vous transférer latéralement pour vous mettre debout ou vous asseoir dans votre Q50 R en relevant les accoudoirs rabattables - qui comportent aussi une position de verrouillage. Vous pouvez également replier le repose-pieds et, surtout, le replier sous l'assise, ce qui laisse tout l'espace nécessaire pour poser les pieds au sol.



Scannez le QR code avec votre téléphone pour regarder la vidéo.



1220 mm

RAYON DE BRAQUAGE

Le Quickie Q50 R a un rayon de braquage de seulement 1220 mm, ce qui le rend idéal pour une utilisation en intérieur. Vous pouvez désormais vous déplacer dans les couloirs étroits, les cuisines et autres espaces restreints sans avoir à effectuer des manoeuvres compliquées.



ÉLECTRONIQUE VSI

Le Q50 R est équipé de l'électronique VSI de Curtiss-Wright, une marque reconnue dans le secteur depuis plus de 40 ans et qui est synonyme de qualité. Avec support de commande escamotable et module de puissance intégré dans le joystick pour une maintenance plus simple.

PERFORMANCE EN EXTÉRIEUR

Le Q50 R est plus qu'un fauteuil électrique compact et pliable. Découvrez ses performances en extérieur. Laissez la voiture à la maison, déployez votre Q50 R, il est temps d'aller où bon vous semble.

DOUBLE SUSPENSION

Les élastomères à l'avant réduisent considérablement les vibrations et le bruit et, avec les amortisseurs arrière situés sous l'assise, contribuent à atténuer les chocs lors du franchissement de nids de poule ou de terrains irréguliers. Vous appréciez ainsi une conduite souple, et le Q50 R fait le reste.

TRACTION

Équipé de **roue arrière de 12"** pour des performances optimales en extérieur, offrant une bonne adhérence sur différents types de terrain. De plus, elles sont équipées de garde-boue qui vous protègent des éclaboussures ou des gravillons pendant la conduite.

STABILITÉ

Sa longueur totale de **1030 mm** lui confère un niveau de stabilité supérieur, ce qui vous permet de conduire en toute sécurité sur des pentes allant jusqu'à 8 degrés. Il est également équipé de série de roulettes anti-bascule pour assurer encore plus de sécurité.

ROBUSTESSE

Les tubes ovales du cadre du Q50 R rendent le châssis plus rigide et plus résistant à la flexion, ce qui réduit considérablement les mouvements du cadre pour une conduite très confortable - et avec une garantie de **5 ans** sur le châssis.



HAUTE PERFORMANCE ET EFFICACITÉ.

Nous concevons des fauteuils électriques depuis plus de 40 ans, en collaboration avec des fabricants de renommée mondiale, afin de proposer des fauteuils robustes, dotés des meilleures performances de conduite, d'une autonomie et d'une fiabilité que les autres ne peuvent égaler.

50 mm

FRANCHISSEMENT

Équipé de moteurs efficaces de 200 watts sans charbons et sans aucune maintenance, qui vous donnent la puissance dont vous avez besoin pour franchir des obstacles jusqu'à 50 mm. De plus, positionné dans l'alignement de l'axe de roue son efficacité est optimisée.



MODE "ROUE LIBRE"

Les moteurs en mode "roue libre" offrent très peu de résistance, ce qui vous permet de déplacer manuellement le fauteuil roulant avec peu d'effort. De plus, la barre supérieure du dossier est rembourée, ce qui en fait un point de prise confortable pour pousser le fauteuil roulant.

500

KM AUTONOMIE

Grâce à l'efficacité optimisée de notre moteur, le Q50 R peut offrir une autonomie impressionnante de 50 km* avec sa batterie au lithium (et ce, avec une seule charge).



BATTERIE LITHIUM 30 AMP

Avec un poids de seulement **5.5 kg**, vous pouvez retirer la batterie sans effort pour la charger indépendamment. Elle est également amovible lorsque le fauteuil est plié.

CHARGEZ MÊME PLIÉ !

Lorsque le fauteuil est plié, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie car le fauteuil dispose d'un port de charge sur le dessous du manipulateur.



Scannez le QR code avec votre téléphone pour regarder la vidéo.

* Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d'énergie en un fauteuil roulant.

METTEZ-VOUS À L'AISE.

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous serez toujours confortablement installé dans votre Q50 R.



Scannez le QR code avec votre téléphone pour regarder la vidéo.

450 mm
550 mm


DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR

Vous avez besoin d'un meilleur soutien dorsal ? Il suffit de relâcher les boutons situés à l'arrière des tubes du dossier pour régler la hauteur du dossier de 45 à 50 cm. Le diamètre des tubes du dossier vous permet d'adapter également tout dossier JAY.



COUSSIN EN MOUSSE DE SÉRIE

Le coussin en mousse ne se contente pas de vous offrir du confort, il est également doté d'une housse respirante qui laisse passer la chaleur corporelle, ce qui vous permet de rester au frais et au sec lors de longs voyages.

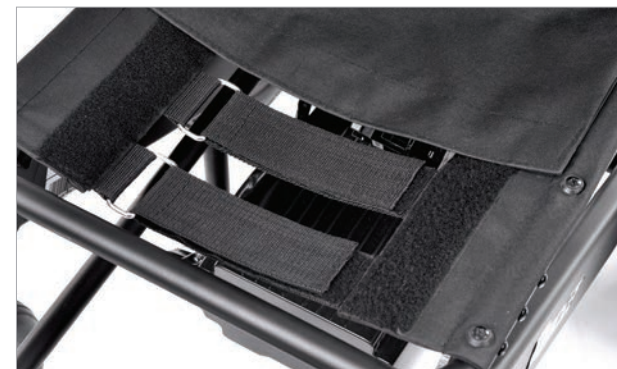

TOILE D'ASSISE RÉGLABLE EN TENSION

La toile de dossier et la base de l'assise sont dotées de sangles réglables en tension, de sorte que vous ne perdez jamais de fermeté et que vous pouvez les retendre chaque fois que vous en avez besoin, en les adaptant à votre morphologie et à votre confort.

LA TOUCHE FINALE.

Disponible avec un élégant châssis noir et 3 kits couleur pour personnaliser les détails à votre goût !

VERT

BLEU

ROUGE

POCHETTES DE RANGEMENT

Le Q50 R dispose de deux pochettes de rangement spacieuses à fermeture éclair, l'une sur le dossier et l'autre sous l'assise, afin que vous puissiez ranger vos effets personnels.



DONNÉES TECHNIQUES / Q50 R

Poids max. Utilisateur	136 kg	Vitesse maximale	6 km/h
Largeur base motrice	600 mm	Batteries	30 Amp, Lithium
Longueur fauteuil plié	800 mm	Electronique	VSI (Curtiss & Wright)
Hauteur fauteuil plié	400 mm	Chargeur	24 V, 5 Amp
Largeur totale	600 mm	Moteurs	2 x 200 Watts, sans charbons
Longueur totale	855-1030 mm	Pente max. de sécurité	8°
Hauteur totale	905-1005 mm	Franchissement	50 mm
Hauteur de dossier	450-550 mm	Roues	Roue arrière: 12" bandage / Roues avant: 8" bandage
Hauteur d'assise	490 mm (sans coussin)	Coloris inserts	Rouge, vert et bleu
Largeur d'assise	430 mm (largeur du coussin)	Poids du fauteuil	37.5 kg (31.8 kg sans batterie)
Profondeur d'assise	450 mm (profondeur du coussin)	Poids de la batterie	5.5 kg
Hauteur de l'accoudoir	280 mm (à partir de l'assise)	Partie la plus lourde	29.5 kg (sans batterie, coussin, ni dossier)
Autonomie	50 km*		

* Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d'énergie en un fauteuil roulant.

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».



Pour plus d'informations sur les options et leur disponibilité, veuillez-vous référer à la fiche de mesure. Nos produits sont en constante amélioration, c'est pourquoi Sunrise Medical se réserve le droit de modifier le design et les données techniques indiquées sans préavis.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: +33 (0)2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr