



LIFE FAMILY

LA FAMILLE QUICKIE LIFE

LA FAMILLE FAIT PEAU NEUVE AVEC PLUS DE POSSIBILITÉS, DE FONCTIONNALITÉS ET DE PERSONNALITÉ.

Chaque membre de la famille LIFE se définit par un parfait équilibre entre une structure totalement réglable, de nombreuses nouvelles fonctionnalités, une robustesse sans failles et une touche de modernité.

A chacun le sien. Avoir le choix entre un cadre rigide, reconnu pour sa rigidité et sa légèreté optimisée ou un châssis pliable par croisillon, apprécié pour simplifier les transferts et le transport, vous êtes assuré de trouver le LIFE qui vous conviendra... et encore plus aujourd'hui avec toutes les nouvelles options !





LIFE

LE VOYAGEUR

Châssis pliant, disponible en version potences fixes et potences escamotables (photo ci-contre).



LIFE R

LE DYNAMIQUE

Châssis non pliant, tout en étant totalement réglable. Repose-pieds fixes.



LIFE

UNE VIE MODERNE
UNE VIE EN MOUVEMENT...



VIE ACTIVE

Vivez votre vie pleinement.

Avec votre **QUICKIE LIFE** faites ce que voulez, quand vous voulez!

Compact, fonctionnel, robuste. Le **Quickie Life** est incroyablement compact sans compromis sur la qualité. Aujourd'hui encore plus que jamais avec la possibilité de rabattre son dossier sur l'assise. Le transporter devient un jeu d'enfant.

Disponible avec des potences fixes ou escamotables, le **Quickie Life** répond à un grand nombre de besoins que vous exigez d'un fauteuil pliant. Le **Quickie Life** rend les activités de votre vie quotidienne plus simples.

Sa qualité reconnue depuis de nombreuses années en fait un fauteuil incontournable dans sa catégorie, endurant et efficace. Son design et toutes ses pièces, largement reconnues, classifient le **Quickie Life** comme un fauteuil très fiable acceptant un poids utilisateur jusqu'à 140 kg.

Votre **Quickie Life**, c'est aussi une rencontre entre esthétique et robustesse. Personnalisez-le à votre image en choisissant parmi une large palette de couleurs et de pièces anodisées. Mais aussi en fonction de vos besoins „cliniques“. Différents types d'accoudoirs, de protège-vêtements, de repose-pieds, de roues, de main-courantes... s'offrent à vous pour que le **LIFE** soit la solution adaptée à votre style de vie et à vos besoins pour une meilleure qualité de vie au quotidien.



LIFE

LE VOYAGEUR

La performance prend peu de place quand on s'appelle **Quickie Life**. Que votre choix se porte sur le look plus actif avec le châssis potences fixes ou le côté pratique de la version potences escamotables, son tout nouveau dossier rabattable sur l'assise vous permet de le transporter et de le stocker très aisément!



Options et caractéristiques du Quickie LIFE.

Pour connaître toutes les options disponibles sur le LIFE veuillez vous référer à la fiche de mesure.



// SUPPORT ROUES ARRIÈRE

Support redessiné apportant légèreté. Carrossage de 0° à 4°, réglage du centre de gravité (8,3 cm à 2,3 cm).



// ACCOUDOIR HEMIPLÉGIQUE

Nouveau: accoudoir avec manchette hémiplegique.



// VERROU DE PLIAGE

S'opère d'une seule main, maintient le fauteuil plié en toute sécurité.



// PROTEGE-VÊTEMENTS

Protège-vêtements avec ou sans garde-boue redessinés disponibles en aluminium et en carbone.



// POTENCES ESCAMOTABLES

Potences 90° désormais disponibles.



// DOSSIER RABATTABLE SUR L'ASSISE

Pour un gain de place indéniable.



// PALETTE MONOBLOC RELEVABLE

Réglable en angle, profondeur et relevable.



// PERSONNALISATION

Packs anodisés: fourches & supports d'axe de roues arrière. 3 teintes.

LIFE R

RIGIDITÉ ET MODULARITÉ.



LE DYNAMIQUE

Rigide, fiable et robuste, le **LIFE R** a été conçu pour améliorer votre vie active ... maintenant et pour les années à venir.

Grâce à son châssis modulaire et ses multiples configurations possibles, le **Quickie LIFE R**, répond parfaitement aux attentes des adultes et adolescents en pleine croissance, toujours en action. Quelles que soient vos activités, vous pouvez toujours compter sur votre **Life R**!

Ses nombreuses nouveautés le rendent encore plus moderne et fonctionnel. Notamment ses nouveaux supports de roues arrière redessinés apportant de la finesse dans le design global du fauteuil. Des choix de couleur pour les roues avant et la toile de dossier, pour personnaliser votre fauteuil selon vos préférences. Mais aussi l'introduction de matériaux nobles comme le carbone, la performance des main-courantes Surge ou encore des roues de 25" pour les plus grands d'entre vous... Plus qu'un simple relooking, le **Life R** apporte une nouvelle dimension à votre mobilité!



LIFE R

LE DYNAMIQUE

Il impressionne par sa rigidité, ses multiples réglages et son côté compact. Ajuster le centre de gravité pour adopter une conduite plus ou moins dynamique ou choisir l'angle idéal du dossier pour un confort d'assise optimal et le rabattre pour le rendre encore plus compact et facile à transporter, le Life R répond à toutes vos attentes ...



Options et caractéristiques du Quickie LIFE R.

Pour connaître toutes les options disponibles sur le LIFE R veuillez vous référer à la fiche de mesure.



// SUPPORT ROUES ARRIÈRE

Support redessiné apportant légèreté.
Carrossage de 0° à 4°, réglage du centre de gravité (8,3 cm à 2,3 cm).




// FREIN A DÉBATTEMENT COURT OPTIMISÉ

Simple à activer avec levier escamotable pour faciliter les transferts.



// DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE

Mécanisme léger et simple à ajuster.
Inclinaison de -12° à +8° par palier de 4°.

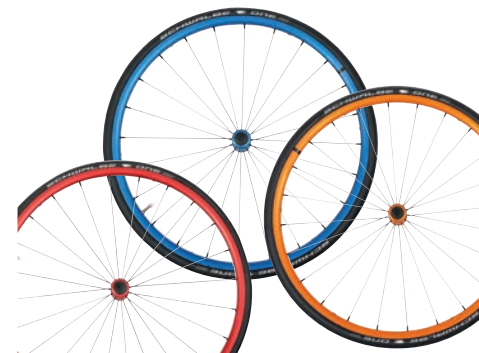

// ROUES ARRIÈRE ANODISÉES 24"

Accentuez votre jeu de couleurs, en optant pour un des 3 coloris des roues anodisées 24", incluant moyeu et jante.



// PERSONNALISATION

Personnalisez votre style en choisissant un pack anodisé, 3 couleurs au choix pour les fourches et supports des roues arrière.



// MAIN-COURANTES SURGE® LT

Bande de caoutchouc Gripton sur le dessus de la main-courante ovale offrant un grip maximal.



// VERROU PALETTE MONOBLOC

Grâce à ce verrou, la palette reste toujours en place même lorsque vous roulez sur des sols irréguliers.



// DOSSIER RABATTABLE

Dossier rabattu, roues arrière retirées, le Life R est ultra-compact pour se loger dans le coffre d'une voiture.

DONNEES TECHNIQUES

	Life	Life R
Poids max. Utilisateur	140 kg	125 kg
Version châssis	Potences fixes: 75°/85 °/85° avec ajustement 4 cm Potences escamotables: 90°/80°/70°	Angles châssis avant: 75°/85 °/85° avec ajustement 4 cm
Largeur d'assise	36 - 50 cm	34 - 48 cm
Profondeur d'assise	36 - 50 cm	36 - 50 cm
Hauteur d'assise avant	40 - 54 cm	39 - 50 cm
Hauteur d'assise arrière	40 - 51 cm	36 - 47 cm
Hauteur de dossier	25 - 50 cm	25 - 45 cm
Angle de dossier	-12° à + 12°	-12° à + 12°
Carrossage	0°/1°/2°/3°/4°	0°/1°/2°/3°/4°
Largeur // longueur // hauteur totale	76 cm // 107.5 cm // 99.5 cm	72 cm // 107,5 cm // 95 cm
Pente max. sécurité	7° (pour usage freins de parking)	7° (pour usage freins de parking)
Poids fauteuil complet	à partir de 12 kg (potences fixes) à partir de 12.6 kg (potences escamotables)	à partir de 11 kg
Colours	32	32
Crash test	Oui (approuvé pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19)	
Transport sans Utilisateur	Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule (ex. voiture ou avion)	
Usage prévu et environnement	Pour personne à mobilité réduite (enfant & adulte); autopropulsion ou fauteuil poussé par une tierce personne, usage intérieur et extérieur.	

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.

Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, veuillez vous reporter à la fiche technique/fiche de mesure ou au manuel d'utilisation ».



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

