


Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions¹

HOSPITAL CARE

Surflo™ S-PLUS

Cathéter IV droit
Informations sur le produit

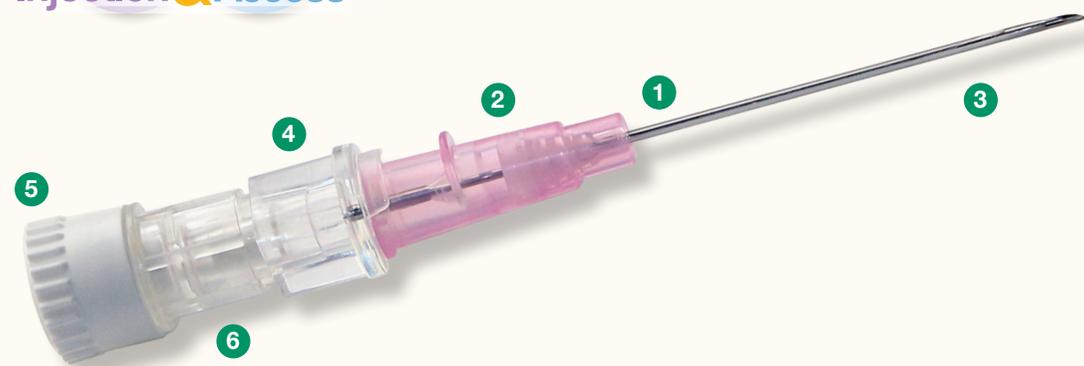

- La chambre de reflux confirme visuellement que le cathéter est correctement inséré dans la veine
- L'extrémité pointue de l'aiguille minimise les traumatismes vasculaires pendant l'utilisation
- Gamme complète de 14G à 26G

Description	Matériaux
1 Tube de cathéter	FEP
2 Embase de cathéter Goupille de calage	Polypropylène + master batch Polyoxyméthylène
3 Canule (aiguille interne)	Acier inoxydable
4 Raccord de l'aiguille	Copolymère styrène/butadiène
5 Bouchon Luer-lock	Polypropylène
6 Filtre de raccord d'évent Corps de raccord d'évent	Polyéthylène Copolymère styrène/butadiène
Protection	Polyéthylène
Emballage du dispositif	Papier enduit d'adhésif. Film thermoformé: polyéthylène laminé/ complexe polypropylène

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Conçu et fabriqué
par des techniciens
qualifiés en Europe

¹ Du temps de qualité pour de meilleurs soins

"Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions

² Injection et accès

Vos cathéters de choix, pour une large gamme d'applications IV

Gamme de produits

Référence	Couleur	Ø externe du cathéter	Ø interne du cathéter	Longueur du cathéter	Débit ml/min
SR+DM2619SD	Violet	26G 0,64 mm	0,45 mm	19 mm	19
SR+DM2419SD	Jaune	24G 0,74 mm	0,55 mm	19 mm	29
SR+DM2225SD	Bleu	22G 0,90 mm	0,65 mm	25 mm	42
SR+DM2032SD	Rose	20G 1,00 mm	0,75 mm	32 mm	59
SR+DM1832SD	Vert	18G 1,30 mm	0,95 mm	32 mm	103
SR+DM1845SD	Vert	18G 1,30 mm	0,95 mm	45 mm	96
SR+DM1745SD	Blanc	17G 1,50 mm	1,15 mm	45 mm	155
SR+DM1645SD	Gris	16G 1,75 mm	1,35 mm	45 mm	225
SR+DM1445SD	Orange	14G 2,00 mm	1,55 mm	45 mm	290



Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Utilisation prévue: Cathéter IV périphérique pour accès veineux périphérique à court terme qui, en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux, permet l'administration de fluides. Date de création: Mars 2024.

Conditionnement

Unité individuelle Emballage thermoformé

Boîte unitaire 50 pièces

Carton d'expédition 500 pièces, Poids brut ± 4 kg
Dimensions ± 380 x 730 x 180 mm

Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié

TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

Fabricant

Delta Med S.p.A. (Italy)

Distributeur

TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain, Belgique

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10^{-6}

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date d'expiration sont imprimés sur l'emballage du dispositif
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de la chaleur
- Conserver au sec
- Fragile, à manipuler avec précaution

Precautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
- Ne pas réutiliser/ne pas restériliser
- Ne pas tenter de réinsérer une aiguille si elle a été partiellement ou totalement retirée
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection
- Le temps de pose doit être conforme aux normes d'utilisation acceptées

Consultez toujours l'étiquette du produit et le mode d'emploi pour un aperçu complet des avertissements, des mises en garde et/ou des précautions avant l'utilisation effective.

Cette gamme complète l'offre plus large de produits Terumo, notamment un portefeuille complet de produits de sécurité et de produits IV classiques qui peuvent être trouvés sur notre page web www.terumo-europe.com

Votre partenaire Terumo



TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Terumo France S.A.S. - Bâtiment Atria - 3ème étage
- 1 avenue Edouard Belin -
92500 RUEIL MALMAISON - France

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à TERUMO CORPORATION, à ses sociétés affiliées ou à des tiers non liés. Publié par Terumo Europe S.A.

Image à des fins de visualisation uniquement