


HOSPITAL CARE

Surflo™

Microperfuseurs à ailettes
Informations sur le produit

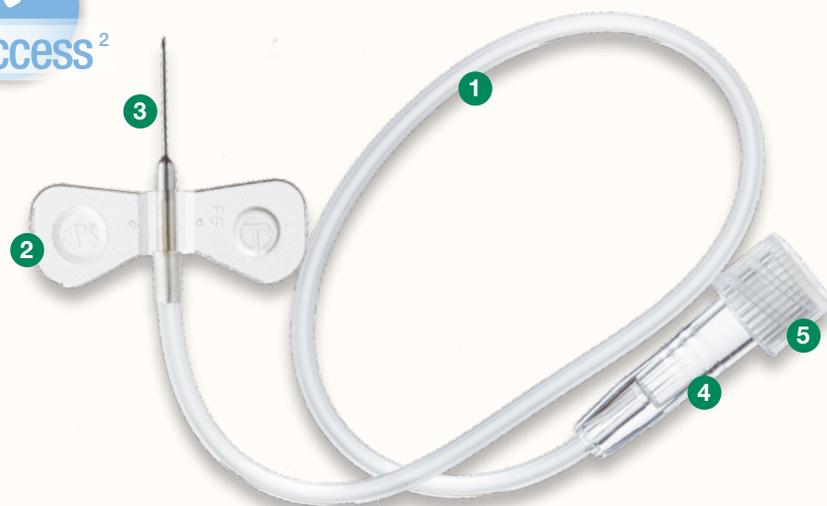

Pour une facilité
d'utilisation

Pour garantir la stabilité et la prise pendant la ponction veineuse, les tubulures de perfusion à ailettes Surflo™ sont équipées d'ailettes verrouillables. Grâce aux ailettes légèrement obliques (<3° par rapport à la canule), une pression moindre est exercée sur le vaisseau sanguin lors de la ponction.

| Description | Matériaux |
|------------------------|--|
| 1 Tubulure | Polychlorure de vinyle |
| 2 Embase à ailettes | Polychlorure de vinyle + master batch |
| 3 Canule | Acier inoxydable |
| 4 Adaptateur | PMMA |
| 5 Bouchon d'adaptateur | Polypropylène (articles « NL » et « EL ») Polyéthylène (articles « BLK ») |
| Protection | Polyéthylène |

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de DEHP ou de latex naturel.

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10⁻⁶ pour tous les articles NL/EL. Rayonnement gamma pour un niveau de stérilité d'au moins 10⁻⁶ pour les articles BLK.

Stockage

- Durée de conservation de 3 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont embossés sur le film de l'emballage unitaire (articles « BLK » et « EL ») ou imprimés (articles « NL ») sur l'emballage unitaire.
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

¹ Du temps de qualité pour de meilleurs soins
² Du temps de qualité pour de meilleurs soins*, telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
² Injection et accès

Le confort de vos patients **est entre vos mains !**

Gamme de produits

| Référence | Couleur | Ø externe de la canule | Longueur de la canule | Volume mort | Longueur de la tubulure |
|-------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| SV*18BLK03 | Rose | 18G, 1,20 mm | 19 mm | 0,46 ml | 300 mm |
| SV*19NL30 | Ivoire | 19G, 1,10 mm | 19 mm | 0,45 ml | 300 mm |
| SV*21BLK03 | Vert | 21G, 0,80 mm | 19 mm | 0,45 ml | 300 mm |
| SV*22BLK03 | Noir | 22G, 0,70 mm | 19 mm | 0,45 ml | 300 mm |
| SV*23NL30 | Bleu | 23G, 0,60 mm | 19 mm | 0,40 ml | 300 mm |
| SV*25NL30 | Orange | 25G, 0,50 mm | 19 mm | 0,40 ml | 300 mm |
| SV*27EL | Gris | 27G, 0,40 mm | 13 mm | 0,29 ml | 200 mm |



Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Pour les codes BLK/EL :

Organisme notifié TÜV Rheinland 0197
Fabricant TERUMO CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japon
Représentant CE TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgique

Pour les codes NL :

Organisme notifié TÜV SÜD 0123
Fabricant TERUMO MEDICAL PRODUCTS HANGZHOU M4-9-5, Economic & Technological Development Zone, HANGZHOU, 310018 Chine
Représentant CE TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgique

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection

Consultez toujours l'étiquette du dispositif pour un aperçu complet des avertissements, des mises en garde et/ou des précautions avant l'utilisation effective.

Conditionnement

| Boîte unitaire* | Carton de livraison | | |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------|
| | Quantité | Poids brut | Dimensions (L x l x H) |
| 50 | 500 | 3,2 kg | 430 x 220 x 265 mm |
| 50 | 500 | 3,1 kg | 512 x 262 x 264 mm |
| 50 | 500 | 2,6 kg | 430 x 220 x 265 mm |
| 50 | 500 | 2,6 kg | 430 x 220 x 265 mm |
| 50 | 500 | 2,6 kg | 510 x 257 x 98 mm |
| 50 | 500 | 2,6 kg | 510 x 257 x 98 mm |
| 100 | 1000 | 5,4 kg | 475 x 255 x 465 mm |

Unité individuelle : Emballage blister (film blister thermoformé et papier)

Choisissez parmi une large gamme

Le diamètre extérieur de l'aiguille peut être identifié à l'aide de l'embase à ailettes à code de couleur ISO.



TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation +81 3 6742 8500
Terumo Europe N.V. +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
 Bâtiment Atria – 3ème étage
 1 avenue Edouard Belin
 92500 RUEIL MALMAISON
 France

www.terumo-europe.com

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Date d'établissement Février 2023

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.