

Spiromètres



RESPIVOL

Dispositif d'entraînement (patient unique) de stimulation et de rééducation de l'inspiration profonde, avec des objectifs visuels à atteindre.



Respivol est destiné aux patients atteints d'**insuffisance respiratoire chronique** telle que : asthme, BPCO, mucoviscidose ou insuffisance post-opératoire.

Il est particulièrement efficace pour drainer les mucus épais générés par la mucoviscidose, avant la prise du médicament.

Afin de réussir le drainage pulmonaire, une pause inspiratoire est nécessaire (et non une apnée).

L'air inspiré se diffuse ainsi dans tout l'arbre bronchique et joue le rôle d'un « piston » qui permet d'évacuer le mucus. En utilisant **Respivol**, le patient s'entraîne à la pause inspiratoire en maintenant les curseurs de débit (à gauche) et de volume (à droite) stables quelques secondes ; en apnée, ils redescendent.

Les objectifs visuels sont donc importants et incitatifs pour le patient.

Composition du produit :

1 corps transparent divisé en 3 colonnes :

- . Colonne centrale d'où est inspiré l'air,
- . Colonne de gauche qui indique le débit, matérialisé par la position du curseur,
- . Colonne de droite, graduée, avec 2 repères mobiles : celui du bas indique la performance atteinte, celui du haut indique l'objectif à atteindre,

1 socle en polypropylène non toxique,

2 boules en polypropylène non toxique,

1 tuyau annelé avec embout buccal en polyéthylène non toxique,

1 filtre à air

Possibilité de désinfection à froid - Durée de conservation : 5 ans. Pas de nombre d'utilisation préconisé

Dispositif médical de Classe I, non stérile et sans fonction de Mesure, conforme à la directive MDR 2017/745

Garantie : 1 an

Fabriqué en Italie

Poids : **Respivol** Enfant : 250 grs – EAN : 0701197491229 – L21xI6.5xh19cm

Respivol Adulte : 240 grs – EAN : 0701197491236 – L22xI7xh19.5cm

Carton de 10 – 3.890 kg – L40 x I24 x h42.5 cm

Code douanier : 90189084 – Origine : Italie

2 modèles sont disponibles :

MERESPIVAL2500 Respivol Enfant (Bleu) de 200 à 2500cc

MERESPIVAL5000 Respivol Adulte (Vert) de 300 à 5000cc



RESPILIFT

Respilift est un dispositif complémentaire du Respivol.

Muni d'une valve unidirectionnelle, il s'intègre à l'un d'eux et permet d'exécuter un cycle respiratoire continu : inspiration et expiration - Durée de conservation : 5 ans. Pas de nombre d'utilisation préconisé

CE Classe I – Non stérile

Fabriqué en Italie

Garantie : 1 an

Poids : 0.035 kg – L13xI9x4cm – Carton de 50 : 2.070 kg – L39 x I30 x h25 cm

EAN : 0701197491250

Code douanier : 90189084

MERESPILIFT

RESPILIFT



RESPIPROGRAM

Dispositif d'entraînement à la respiration par l'inspiration

Respirogram aide le patient à retrouver une respiration dite « normale » après une intervention pulmonaire ou abdominale.

Composition :

- Corps transparent en copolymère et polystyrène,
- 3 compartiments contenant chacun 1 boule de couleur en polypropylène,
- 1 tuyau annelé avec embout buccal en polyéthylène (matériaux non toxiques),
- Sur chaque compartiment est indiquée la valeur correspondant au volume inspiré par seconde soit 600, 900 ou 1 200 cc par seconde,
- Démontable pour permettre un nettoyage complet,
- Sans latex
- Poids : 135 grs, L13xI6.5x15cm – Carton de 24 : 3.750 kg – L34.5 x I22 x h42 cm
- Durée de conservation : 5 ans. Pas de nombre d'utilisation préconisé

Dispositif médical de Classe I, non stérile et sans fonction de Mesure, conforme à la directive MDR 2017/745
Garantie : 1 an - Fabriqué en Italie - EAN : 0701197491205 - Code douanier : 90189084 – Origine : Italie

MERESPIPROGRAM RESPIPROGRAM



RESPI-IN-OUT

Conçu pour faciliter l'inspiration et l'expiration profondes, améliorant la ventilation au niveau des alvéoles pulmonaires.

RESPI-IN-OUT® est un exerciceur à pression positive (expiration) et volumétrique (inhalation) pour la gymnastique respiratoire. Conçu pour faciliter l'inspiration et l'expiration profondes. La respiration profonde aide à améliorer la ventilation des voies respiratoires et peut faciliter l'élimination du mucus des voies respiratoires. **RESPI-IN-OUT®** est un dispositif mono-patient
Matériaux non toxiques convenant au contact de la cavité buccale
Durée de conservation : 5 ans. Pas de nombre d'utilisation préconisé

CONTENU :


- . **RESPI-IN-OUT®**
- . Tube avec embout buccal
- . 3 connecteurs colorés avec filtre à grille, caractérisés par des trous de différentes tailles (rouge, jaune et vert)

	RAPPORTO	SCALA GRADUATA	PRESSIONE POSITIVA	VOLUME INSPIRATO
	RATIO	GRADUATED SCALE	POSITIVE PRESSURE	INSPIRED VOLUME
	1:1	7	± 7cm H ₂ O	cc 1000
	1:1,5	7	± 10,5cm H ₂ O	cc 1050
	1:2	7	± 14cm H ₂ O	cc 1400

Dispositif médical de Classe I, non stérile et sans fonction de Mesure, conforme à la directive MDR 2017/745

Garantie : 1 an - Fabriqué en Italie - Poids : 144 grs, L11xI7.5xh18cm - EAN : 08033123400039 – UDI : 8033123400039 - Code douanier : 90189084
Carton de 20 : 3.750 kg – L34.5 x I22 x h42 cm

Lien pour découvrir la gamme : <https://www.respiratoryline.it/>

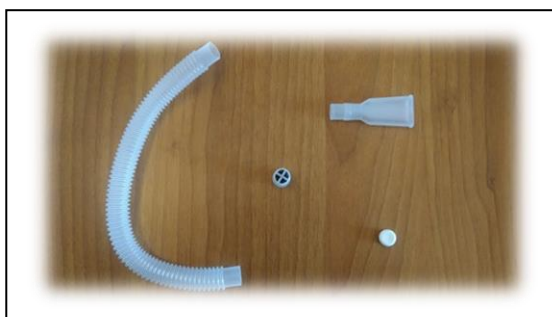

Accessoires pour Spiromètre

MECAPUCHON	CAPUCHON BLANC POUR SPIROMETRE
MEEMBOUTBUCCAL	EMBOUT BUCCAL POUR SPIROMETRE
MEFILTRE	FILTRE POUR SPIROMETRE
METUBEANNELE	TUBE ANNELE POUR SPIROMETRE