

**AQUATEC®**

# Orca, Orca XL



Le confort et la sécurité  
dans le bain.

**INVACARE**  
Yes, you can.®

## Aquatec **Orca, Orca XL**

La gamme *Aquatec Orca* est une gamme d'élevateurs de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité.

Doté d'une télécommande ergonomique intégrant la batterie, il est très simple d'utilisation.

Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs : dossier inclinable, version XL pour des patients allant jusqu'à 170 kg, dossier avec maintiens latéraux.

- Crochet pour la télécommande sur le dossier
- Montage simplifié des accessoires
- Poignée de transport



## Caractéristiques




### Aquatec **Orca XL**

Poids maxi utilisateur :  
170 kg - Blanc.  
Code 1573685



Disponible avec des maintiens latéraux de dossier pour plus de maintien et confort.  
Code 1573970 - Blanc

## Principe de fonctionnement:

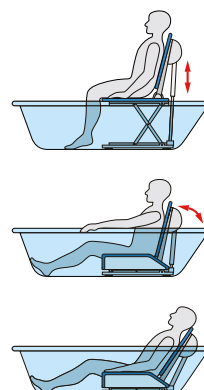

### Pièces détachées **Orca, Orca XL**

- |   |         |
|---|---------|
| ❶ Télécommande complète avec câble spiral                       | 1470902 |
| ❷ Ventouses arrière à vis (la paire)                            | 15071   |
| ❸ Ventouses avant clipsées (la paire)                           | 15072   |
| ● Chargeur complet avec câble                                   | 1471084 |
| ● Revêtement d'assise bleu                                      | 1470765 |
| ● Revêtement de dossier bleu                                    | 1470766 |
| ● Revêtement d'assise et de dossier bleu                        | 1470767 |
| ● Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux | 1471568 |
| ● Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux  | 1471567 |

**Autonomie:** 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

## Caractéristiques et options



### Télécommande ergonomique

intégrant la batterie. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité.



### Montage très simple et sans outils

Conception de l'**Orca** en 2 parties très simple à monter et légère pour pouvoir le transporter.



### Base antidérapante

pour plus de sécurité.



Système d'attache de la télécommande sécurisé et facile à installer.




Housse amovible lavable à 60°.



Système de vérin très performant

## Accessoires

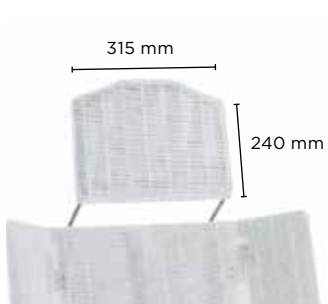

### Appui-tête pour *Aquatec Orca*

Réglable en hauteur.  
Bleu 15462  
Blanc 15461



### Ceinture de maintien pour *Aquatec Orca*

Pour un bain en toute sécurité.  
Ceinture abdominale/  
poitrine.  
1528702



### Guide pour rabats latéraux de l'assise

Lorsqu'il y a des barres de maintiens montées à l'intérieur de la baignoire.  
Ref.: 15309. Largeur :  
350 mm.



### Rehausseurs jeu de 4

Peuvent rehausser l'assise jusqu'à 60 mm pour *Aquatec Orca*.  
Hauteur 20 mm avec ventouses 15170  
Hauteur 20 mm sans ventouses 14694

## Accessoires



### Sac de transport

Avec roulettes pour le transport et le stockage.  
Aquatec **Orca** 14586



### Plots d'abduction à visser


1525932 Plot 70 mm  
1525933 Plot 120 mm

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<p>Largeur d'assise</p> <p>Orca</p> <p>375 mm</p>	<p>Largeur d'assise avec rabats latéraux</p> <p>Orca</p> <p>715 mm</p>	<p>Profondeur d'assise</p> <p>Orca</p> <p>490 mm</p>	<p>Hauteur du dossier</p> <p>Orca</p> <p>665 mm</p>	<p>Largeur de la base</p> <p>Orca</p> <p>295 mm</p>	<p>Longueur de la base</p> <p>Orca</p> <p>580 mm</p>	<p>Longueur hors-tout</p> <p>Orca</p> <p>920 mm</p>
	<p>Largeur du dossier</p> <p>Orca</p> <p>360 mm</p>	<p>Hauteur hors-tout</p> <p>Orca</p> <p>1075 mm</p>	<p>Hauteur d'assise</p> <p>Orca</p> <p>Max. 420 mm Min. 60 mm</p>	<p>Poids total du produit</p> <p>Orca</p> <p>10,8 kg</p>	<p>Poids batterie</p> <p>Orca</p> <p>0,4 kg</p>	<p>Poids max. utilisateur</p> <p>Orca</p> <p>140 kg Orca XL: 170 kg</p>	<p>Lavable en machine</p> <p>Orca</p> <p>Housse amovible lavable 60°</p>

## Coloris

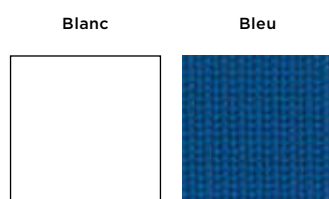

Vidéo disponible sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

